

ENDOfocus

wrzesień-grudzień 2024

& more



KONFERENCJA



W PREZENCIE

SZCZEGÓŁY STRONA 55

P^oldent[®]

Promotorzy **Poldent**[®]



Łukasz Bułatek
Customer Relations Manager
Tel.: 609 217 213
E-mail: l.bulatek@poldent.pl



Agnieszka Góral
Województwo mazowieckie
Tel.: 695 442 448
E-mail: a.goral@poldent.pl



Anna Lalka-Kaczorowska
Województwo łódzkie, pomorskie,
kujawsko-pomorskie
Tel.: 609 414 417
E-mail: a.lalkakaczorowska@poldent.pl



Agnieszka Gajewska
Województwo małopolskie,
śląskie
Tel.: 695 412 415
E-mail: a.gajewska@poldent.pl



Aleksandra Rams
Województwo wielkopolskie,
lubuskie, zachodniopomorskie
Tel.: 607 217 211
E-mail: a.rams@poldent.pl



Aleksandra Mostowska
Województwo podlaskie,
warmińsko-mazurskie
Tel.: 603 219 210
E-mail: a.mostowska@poldent.pl



Maciej Hrechorowicz
Województwo dolnośląskie,
opolskie, śląskie
Tel.: 607 414 413
E-mail: m.hrechorowicz@poldent.pl



Dawid Kwiecień
Województwo świętokrzyskie,
lubelskie, podkarpackie
Tel.: 609 219 215
E-mail: d.kwiecien@poldent.pl

Przedstawiciele

Poldent[®]
CHIRURGIA IMPLANTY



Piotr Cieślak
Implanty, chirurgia,
Polska centralna i północna
Tel.: 607 218 211
E-mail: p.cieslak@poldent.pl



Marta Witkowska
Implanty, chirurgia,
Województwo mazowieckie, łódzkie
Tel.: 695 413 416
E-mail: m.witkowska@poldent.pl



Grzegorz Adamski
Implanty, chirurgia,
Polska południowa
Tel.: 691 214 210
E-mail: g.adamski@poldent.pl

KUP PILNIKI,

A OTRZYMASZ BON NA WYJAZD ZAGRANICZNY

**Kup 70 opakowań Endostar E3 Azure (6 szt.),
a otrzymasz voucher o wartości 2000 zł
na dowolny wyjazd zagraniczny
z firmą szkoleniową IDF Sp. z o.o.**

**oraz profesjonalną prezentację opracowania kanału
korzeniowego pilnikami Endostar E3 Azure.**

Oferta dostępna u Dystrybutora Firmy Poldent. Voucher
zostanie dostarczony przez Promotora z Twojego regionu.

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

iDF | INTERNATIONAL
DENTAL FAIR

VOUCHER
2000 zł



275 zł

Opakowanie 6 szt.

Krok 1: tworzenie glide path



Endostar
EP Easy Path

Bezpieczny pilnik
do glide path

AMBER HT Technology

- > Elastyczny a jednocześnie odporny na złamanie.
- > Wyjątkowy malejący taper i rozmiar ISO 14.
- > Bez trudu podąża za przebiegiem najbardziej zakrzywionych kanałów.



Krok 2: shaping



Endostar
E3 Azure

Innowacyjny
system pilników

AZURE HT Technology

- > Bezpieczny dzięki zwiększeniu odporności na złamanie.
- > Niezwykle elastyczny, co umożliwia opracowanie najbardziej zakrzywionych kanałów.
- > Efektywny i łatwy w użyciu system.



9+4 systemy rotacyjne

Endostar E3 Azure / Endostar EP Easy Path

endo★star



Opakowanie 6 szt. **275 zł**

1 zł ~~35 zł~~

EEG Endostar ENDOgauge

Wielofunkcyjny pojemnik na pilniki z linijką endodontyczną, 1 szt.

Promocja dotyczy opakowań po 6 sztuk.

Endostar E3 Azure


E3AZS25	Small zestaw: 20/06, 25/04, 20/04, 25 mm, 3 szt.	180,-
E3AZS21	Small zestaw: 20/04, 25/04, 20/06, 21 mm, 3 szt.	180,-
E3AZS29	Small zestaw: 20/04, 25/04, 20/06, 29 mm, 3 szt.	180,-
E3AZ25	Basic zestaw: 30/08, 25/06, 30/04, 25 mm, 3 szt.	180,-
E3AZ21	Basic zestaw: 30/08, 25/06, 30/04, 21 mm, 3 szt.	180,-
E3AZ29	Basic zestaw: 30/08, 25/06, 30/04, 29 mm, 3 szt.	180,-
E3AZB25	Big zestaw: 35/04, 40/04, 45/04, 25 mm, 3 szt.	180,-
E3AZB21	Big zestaw: 35/04, 40/04, 45/04, 21 mm, 3 szt.	180,-
E3AZB29	Big zestaw: 35/04, 40/04, 45/04, 29 mm, 3 szt.	180,-
E3AZ200421	Small, 20/04, 21 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ200425	Small, 20/04, 25 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ200429	Small, 20/04, 29 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ200621	Small, 20/06, 21 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ200625	Small, 20/06, 25 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ200629	Small, 20/06, 29 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ250421	Small, 25/04, 21 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ250425	Small, 25/04, 25 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ250429	Small, 25/04, 29 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ250621	Basic, 25/06, 21 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ250625	Basic, 25/06, 25 mm, 6 szt.	275,-

E3AZ250629	Basic, 25/06, 29 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ300421	Basic, 30/04, 21 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ300425	Basic, 30/04, 25 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ300429	Basic, 30/04, 29 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ300818	Basic, 30/08, 18 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ350421	Big, 35/04, 21 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ350425	Big, 35/04, 25 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ350429	Big, 35/04, 29 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ400421	Big, 40/04, 21 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ400425	Big, 40/04, 25 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ400429	Big, 40/04, 29 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ450421	Big, 45/04, 21 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ450425	Big, 45/04, 25 mm, 6 szt.	275,-
E3AZ450429	Big, 45/04, 29 mm, 6 szt.	275,-

Endostar EP Easy Path

EPAM041425BL3	14/04, 25 mm, 3 szt.	180,-
EPAM041425BL6	14/04, 21 mm, 3 szt.	180,-
EPAM041421BL3	14/04, 25 mm, 6 szt.	275,-
EPAM041421BL6	14/04, 21 mm, 6 szt.	275,-

* Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Poldent sp. z o.o. Produkt objęty promocją będzie przesyłany z biura Poldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.

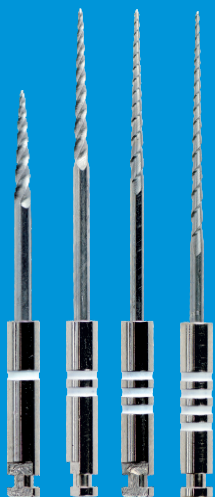

Endostar
RE Re Endo
 Rotary System

Powtórne leczenie
 kanałowe

- > Zalecane w procedurach re-endo w kanałach prostych lub lekko zakrzywionych.
- > Służą do usuwania maszynowego wszystkich materiałów wypełniających kanał, które konsystencją są zbliżone do gutaperki lub uszczelniacza Endomethazone N.
- > Wykonane ze standardowego stopu NiTi.
- > Bardziej sztywne.



AZURE HT Technology



Endostar
REvision

Powtórne leczenie
 kanałowe

- > Zalecane w procedurach re-endo w kanałach prostych, wąskich i zakrzywionych.
- > Służą do usuwania maszynowego wszystkich materiałów wypełniających kanał, które konsystencją są zbliżone do gutaperki lub uszczelniacza Endomethazone N.
- > Wykonane ze standardowego stopu NiTi poddanego obróbce cieplnej Azure HT Technology.
- > Dzięki obróbce HT nie mają sprężystości, można je podjąć i ominąć stopień.



Powtórne leczenie endo

Kup Endostar REvision i odbierz
Endostar RE Re Endo Rotary System za 1 zł

- > Gotowa sekwencja pilników dla ułatwienia i usprawnienia zabiegów re-endo.
- > Specjalnie wyselekcjonowane pilniki w technologii obróbki cieplnej Azure HT Technology.
- > Niezwykle elastyczne.
- > Bezpieczne dzięki odporności na złamanie.

endo★star



AZURE HT Technology

180 zł

REV25BL Endostar REvision
zestaw: 30/08, 25/06, 20/04,
25 mm, 3 szt.

+



1 zł ~~100 zł~~


Endostar RE Re Endo Rotary System
30/12, 30/08, 30/06, 30/04, 4 szt.

Endostar Paper Points

Kalibrowane ćwieki papierowe

Sączki papierowe stosowane do osuszania kanału.

- > Sterylne.
- > Zgodne z rozmiarami ISO.
- > Wysoce absorpcyjne.
- > Mocne, zwarte i jednocześnie elastyczne.

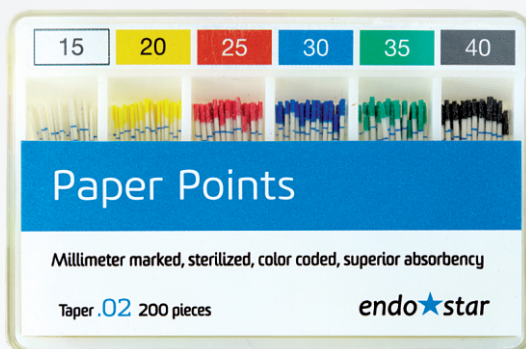

endo★star

od 20 zł

Kalibrowane ćwieki papierowe Endostar
rozmiary od 15 do 80

Kalibrowane ćwieki papierowe, taper 02

PPP2	Pojedyncze rozmiary 15-80, 200 szt.	20,-
PPP21540	Sortowane 15-40, 200 szt.	20,-
PPP24580	Sortowane 45-80, 200 szt.	20,-

Kalibrowane ćwieki papierowe, taper 04

PPP4	Pojedyncze rozmiary 15-80, 100 szt.	25,-
PPP41540	Sortowane 15-40, 100 szt.	25,-
PPP44580	Sortowane 45-80, 100 szt.	25,-

Kalibrowane ćwieki papierowe, taper 06

PPP6	Pojedyncze rozmiary 15-80, 100 szt.	25,-
PPP61540	Sortowane 15-40, 100 szt.	25,-
PPP64580	Sortowane 45-80, 100 szt.	25,-

Promocja do wyczerpania zapasów magazynowych.

Endostar ENDOsizer


Pomiar długości roboczej

- > Narzędzie przeznaczone do precyzyjnego pomiaru długości roboczej pilników oraz długości ćwieków gutaperkowych i papierowych.
- > Posiada wgłębienie dla endostopu.
- > Posiada miejsce do pomiaru długości roboczej pilników (z wgłębieniem na endostop) oraz oddzielne pole do pomiaru ćwieków.

EESIZ Endostar ENDOsizer
kolor kość stoniowa, 1 szt.

45zł

endo★star

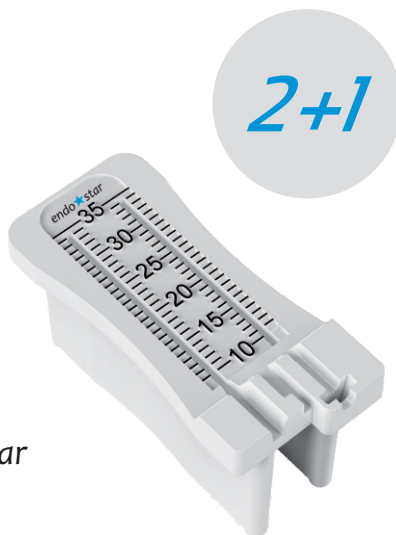

Endostar ENDOcalibrator

Kalibrator do gutaperki z linijką endodontyczną


Zaprojektowany do kształtowania i docinania ćwieków głównych z każdego rodzaju ćwieków gutaperkowych.

EEC Endostar ENDOcalibrator
1 szt.

60zł ~~75zł~~

W zestawie cena 1 szt.

-20%
PRZY ZAKUPIE
3 SZTUK

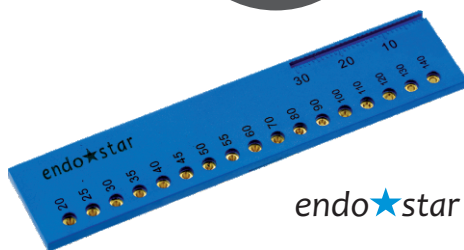

endo★star

Endostar Spreader Sonic Files

endo★star

Irygacja i dezynfekcja kanałów

- > Narzędzia służące do irygacji i dezynfekcji kanału zębowego.
- > Narzędzia pomocnicze podczas usuwania złamanych instrumentów z kanału.
- > Tylko do użytku z urządzeniem aktywującym ultradźwięki.



ESSF Pilniki Endostar Spreader Sonic Files

Rozmiary: 25, 30, 35, długość: 33 mm, 6 szt.

25 zł

ESSF253533 Pilniki Endostar Spreader Sonic Files

Asortyment: 25-35, długość: 33 mm, 6 szt.

PRZY ZAKUPIE
ENDOSTAR SONIC
FILE HOLDER
OTRZYMASZ PILNIKI
ENDOSTAR SPREADER
SONIC FILES (DOWOLNY
ROZMIAR) ZA 1 ZŁ.

Endostar Sonic File Holder

Endochuck do pilników sonicznych

ESFH120 Endostar Sonic File Holder 120°

Uchwyt (endochuck) do endodontycznych pilników sonicznych E1 (120°) stosowany jest podczas leczenia zębów przednich oraz kanałów dystalnych zębów tylnych.

75 zł



ESFH95 Endostar Sonic File Holder 95°

Uchwyt (endochuck) do endodontycznych pilników sonicznych E2 (95°) stosowany jest podczas leczenia zębów przednich oraz kanałów mezialnych zębów tylnych.

75 zł





Zacznij pracować pilnikami rotacyjnymi Endostar

Weź udział w naszym programie i przejdź z pilników ręcznych na rotacyjne.

1. W trakcie trwania programu (6 lub 9 miesięcy) otrzymasz od nas do korzystania za 1 zł Zestaw Combo: kątnicę Endostar Provider, endometr Endostar Navigator i kabel łączący o łącznej wartości 8900 zł.
2. Jeśli w trakcie trwania programu dokonasz zakupu u swojego Dystrybutora, który uczestniczy w programie, na conajmniej 50 opakowań instrumentów rotacyjnych (Endostar E3 Azure, Endostar EP Easy Path, Endostar Revision) po 6 sztuk w opakowaniu będziesz miał możliwość zakupienia Zestawu Combo, z którego korzystałeś w okresie trwania programu za symboliczną złotówkę.
3. W przypadku dokonania zakupów w mniejszym wymiarze będziesz mógł wykupić Zestaw Combo z zastosowaniem rabatu naliczanego za każde zakupione od Dystrybutora opakowanie instrumentów rotacyjnych.
4. Przez cały okres trwania programu będziesz pozostawał pod opieką Promotora Poldent.
5. Będziesz mógł jednokrotnie wziąć udział w bezpłatnym, punktowanym szkoleniu dotyczącym opracowania kanału instrumentami rotacyjnymi w terminie ustalonym z Promotorem Poldent, które poprowadzi lek. dent. Tomasz Kielkowicz.

Poznaj szczegóły programu,
wejdź na stronę www.poldent.pl



E3 Azure EP EASY PATH RE vision

ZESTAW 2 URZĄDZEŃ COMBO TYLKO ZA 1 ZŁ

Przy zakupie jednego z trzech
wybranych zestawów
→ strona 13

Zestaw Combo zawiera:

EPROV Endostar Provider, 1 szt.

ENAV Endostar Navigator, 1 szt.

EA6970-006 Kabel łączący, 1 szt.

1 zł
~~10640 zł~~

endo★star



Zestaw COMBO za 1 zł

Przy zakupie jednego z trzech wybranych zestawów

Zestaw 1

Zestaw Combo za 1 zł przy zakupie 50 opakowań (po 6 szt.)
pilników Endostar EP Easy Path, Endostar E3 Azure, Endostar REvision.



Opakowanie 6 szt. **243 zł** ~~275 zł~~

+



CeraSeal **1 zł**



5 x Endostar EASYdam **1 zł**
koferdam



Bezprzewodowe **1 zł**
słuchawki Baseus

Zestaw 2

Zestaw Combo za 1 zł przy zakupie 50 opakowań (po 6 szt.)
pilników Endostar EP Easy Path, Endostar E3 Azure, Endostar REvision.



Opakowanie 6 szt. **243 zł** ~~275 zł~~

+



CeraSeal **1 zł**



Lampa MaxCure **1 zł**



Bezprzewodowe **1 zł**
słuchawki Baseus

Zestaw 3

Zestaw Combo za 1 zł przy zakupie 50 opakowań (po 6 szt.)
pilników Endostar EP Easy Path, Endostar E3 Azure, Endostar REvision.



Opakowanie 6 szt. **243 zł** ~~275 zł~~

+



CeraSeal **1 zł**



Zestaw Vittra APS **1 zł**



Bezprzewodowe **1 zł**
słuchawki Baseus

* Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Poldent sp. z o.o. Produkt objęty promocją będzie przesyłany z biura Poldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.

Endostar Provider

+ 24 opakowania pilników rotacyjnych
za 1 zł/opak.

endo★star



24X

E3 Azure EP EASY PATH REvision

1 zł/OPAK. ~~6600 zł~~

Przy zakupie kątницы Endostar Provider otrzymasz 24 opakowania wybranych przez Ciebie pilników Endostar E3 Azure, Endostar EP Easy Path, Endostar REvision (po 6 szt.) o wartości 6600 zł.

6500 zł

EPROV Endostar Provider

24 x



275 zł / opak.

* Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Poldent sp. z o.o. Produkt objęty promocją będzie przesyłany z biura Poldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.

Endostar Navigator

Precyzyjny endometr

-20%

- > Niezawodna nawigacja japońskiej produkcji.
- > Bezpieczny i komfortowy pomiar długości kanału korzeniowego.
- > Niezwykła precyzja miary podczas zabiegów endodontycznych.
- > Duży, kontrastowy wyświetlacz z funkcją optycznego oraz dźwiękowego monitorowania położenia pilnika.

2960 zł ~~3700 zł~~

ENAV Endostar Navigator

endo★star



EA6970-006 Kabel przesyłowy
do połączenia kątnicy Endostar Provider
z endometrem Endostar Navigator, 1 szt.

440 zł

Endostar EASYdam

Praktyczny zestaw do zakładania koferdamu



#9



#2A



#12A



#13A

90 zł

-30%



340 zł



440 zł

1066,10 zł

~~1523 zł~~



63 zł



80 zł



130 zł



110 zł

Najpopularniejsze produkty, atrakcyjna oferta cenowa na START.

- EEDC9** Endostar EASYdam Clamp, matowa klamra do koferdamu, #9, 1 szt.
- EEDC2A** Endostar EASYdam Clamp, matowa klamra do koferdamu, #2A, 1 szt.
- EEDC12A** Endostar EASYdam Clamp, matowa klamra do koferdamu, #12A, 1 szt.
- EEDC13A** Endostar EASYdam Clamp, matowa klamra do koferdamu, #13A, 1 szt.
- EEDFR** Endostar EASYdam Frame - metalowa ramka do koferdamu dla dorosłych, 1 szt.
- EEDP** Endostar EASYdam Punch - dziurkacz do koferdamu, 1 szt.
- EEDFO** Endostar EASYdam Forceps - kleszce do koferdamu, 1 szt.
- EEDF5** Endostar EASYfix - Ø 1,5 mm, żółte, small, długość: 4 m, 1 szt.
- EEDT** Endostar EASYdam Template - szablon do koferdamu, 1 szt.
- EEDLM36G** Endostar EASYdam - gumy lateksowe, średnie, zielone, dla dorosłych, bezzapachowe, 36 szt.

endo★star

Endostar ENDOsyringe

Strzykawki do irygacji, 5 ml

- > Uporządkowanie i identyfikacja - oznaczenie kolorami decydująco wpływa na uniknięcie pomyłki podmiany strzykawek z roztworami do płukania.
- > Zwiększenie bezpieczeństwa płukania (dostępne w 4 kolorach: przezroczystym, niebieskim, czerwonym, żółtym).
- > Kodowanie kolorami dla wygodniejszej pracy pod mikroskopem.
- > Dostępne w praktycznej pojemności 5 ml.
- > Standardowe mocowanie luer-lock.



endo★star

52 zł ~~65 zł~~


EESC	Endostar ENDOsyringe, strzykawki Luer Lock, 5 ml, przezroczyste, 100 szt.	52 zł 65 zł
EESB	Endostar ENDOsyringe, strzykawki Luer Lock, 5 ml, niebieskie, 100 szt.	52 zł 65 zł
EESR	Endostar ENDOsyringe, strzykawki Luer Lock, 5 ml, czerwone, 100 szt.	52 zł 65 zł
EESY	Endostar ENDOsyringe, strzykawki Luer Lock, 5 ml, żółte, 100 szt.	52 zł 65 zł
EESASS	Endostar ENDOsyringe, strzykawki Luer Lock, 5 ml, mix kolorów, każdy po 25 szt., 100 szt.	52 zł 65 zł

Endostar SAFETYcounter

Krażki na pilniki rotacyjne do oznaczania liczby użyć instrumentów.

- > Znacznik liczby użyć instrumentów endodontycznych w kolorze żółtym.
- > Wygodne wsparcie w zarządzaniu liczbą użyć pilników.
- > Opakowanie zawiera 100 szt.

NOWOŚĆ

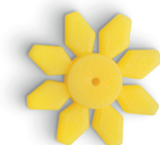

ESC Endostär SAFEBYcounter
100 szt.

50 zł

endo★star

Endostar ENDOgauge

Wielofunkcyjny pojemnik z linijką endodontyczną

- > Wygodny pojemnik do przechowywania pilników.
- > Posiada praktyczną miarkę do mierzenia długości instrumentów endodontycznych i cwiaków gutaperkowych.
- > Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- > Wielokrotnego użytku.
- > Sterylizacja w autoklawie parowym w temperaturze 134°C.
- > Wymiary: 54 x 57 x 17 mm.

NOWOŚĆ





EEG Endostar ENDOgauge
pojemnik, 1 szt.

35 zł

SafeTri (Safety Triangle)

Stop zakażeniom!

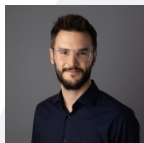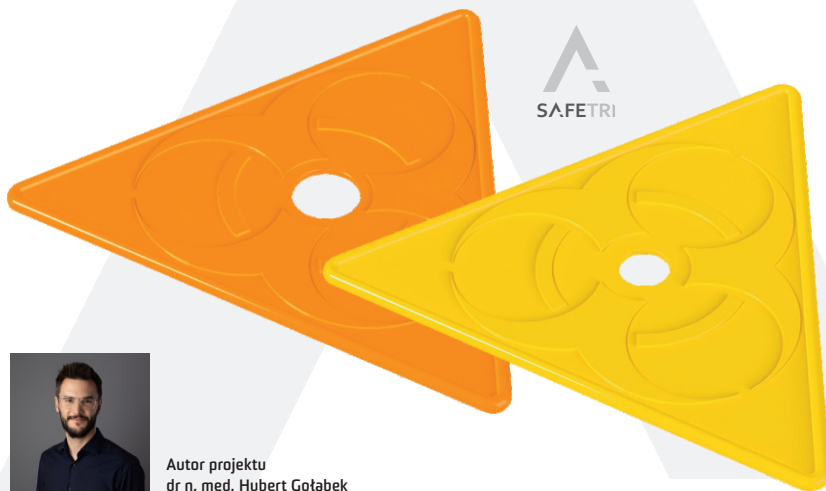

Autor projektu
dr n. med. Hubert Gołąbek

Płytką ochronną stworzoną w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia igłą iniekcyjną przez jej użytkownika, przede wszystkim personel medyczny.

Płytką SafeTri jest odpowiednia do stosowania z licznymi dostępnymi igłami iniekcyjnymi.

Występuje w dwóch wersjach:

- > SafeTri S (kolor żółty) – igły typu luer z mniejszym otworem przelotowym w płytce.
- > SafeTri L (kolor pomarańczowy) – igły o większej ostrości, np. igły do karpuli.

Płytką do sterylizacji w temp 121°C.

SAFETRI_S
mały rozmiar otworu S, 3 szt.

SAFETRI_L
duży rozmiar otworu L, 3 szt.

60 zł

EQ-V i EQ-S



Dwa urządzenia w cenie jednego

*Przy zakupie systemu EQ-V Meta Biomed
bezprzewodowy aktywator do irygacji
EQ-S za 1 zł.*

6990 zł

EQ-VR System do wypełniania na ciepło

Gorący plugger, pistolet, baterie 3 szt., ładowarka,
końcówki 50/04 oraz 60/05, igła do pistoletu 25G 6 szt.
pałeczki gutaperki 100 szt., klucz do zaginania igieł
szczotka do czyszczenia

1 zł ~~2250 zł~~

EQ-SG EQ-S Gray,
urządzenie do aktywacji płynów w kanale, 1 szt.

EQ-SP EQ-S Pink,
urządzenie do aktywacji płynów w kanale, 1 szt.

- > Wielokierunkowa technologia aktywnego przepływu silnie i szybko przesyła środek irygacyjny przez kanał, umożliwiając bezpieczną i skuteczną dezynfekcję kanału.
- > Zastosowana w urządzeniu technologia Active Flow - wgłębienia wzdłuż końcówki w połączeniu z ruchem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zapewnia trójwymiarową aktywację roztworów.



** Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Poldent sp. z o.o. Produkt objęty promocją będzie przesyłany z biura Poldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.*

EQ-V Meta Biomed

-20%

System do wypełniania kanałów gutaperką na ciepło

- > Niezawodne i precyzyjne wypełnianie kanałów korzeniowych.
- > Wydłużona żywotność baterii.
- > Doskonały spust zapewniający płynne i łatwe wypełnienie kanału.



5592 zł ~~6990 zł~~

EQ-VR EQ-V Full Kit

Gorący plugger, pistolet, baterie 3 szt., ładowarka, końcówki 50/04 oraz 60/05, igła do pistoletu 25G 6 szt. pałeczki gutaperki 100 szt., klucz do zaginania igieł szczotka do czyszczenia



NOWOŚĆ
EQ Condenser
zestaw, 3 szt.

1 zł ~~990 zł~~

* Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Poldent sp. z o.o. Produkty gratisowe są przesyłane z biura Poldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.

EQ Condenser

Idealne pluggery do wszystkich technik obturacji z kondensacją na zimno i na ciepło



Pluggery ręczne mogą być używane ze wszystkimi standardowymi technikami obturacji, w tym ciepłą i zimną kondensacją.

- > Podwójna końcówka, z jednej strony elastyczny stop NiTi, a z drugiej stal nierdzewna.
- > Gładka krawędź, płaski koniec.
- > Praktyczne oznaczenie długości (5 mm od końcówki).
- > Zabezpieczenie przed pękaniem i obracaniem.
- > Anodowane na kolorowo.
- > Doskonała odporność chemiczna.
- > Lekkie i wygodne w użyciu.

Końcówka NiTi

Oznaczenie	N40 ●	N60 ●	N80 ●
Długość robocza	0,40 mm	0,60 mm	0,80 mm
Taper	0,02	0,01	0,01

Końcówka stalowa

Oznaczenie	S80 ●	S100 ●	S120 ●
Długość robocza	0,80 mm	1,00 mm	1,20 mm
Taper	0,04	0,02	0,01



CONDENSER_SET	EQ Condenser set, 3 szt.	990 zł
CONDENSER_N40/S80	EQ Condenser N40/S80, 1 szt.	440 zł
CONDENSER_N50/S100	EQ Condenser N50/S100, 1 szt.	440 zł
CONDENSER_N60/S120	EQ Condenser N60/S120, 1 szt.	440 zł

EQ-S Meta Biomed

Bezprzewodowy aktywator do irygacji kanałowej

- > Wielokierunkowa technologia aktywnego przepływu silnie i szybko przesyła środek irygacyjny przez kanał, umożliwiając bezpieczną i skuteczną dezynfekcję kanału.
- > Zastosowana w urządzeniu technologia Active Flow - wgłębienia wzdłuż końcówki w połączeniu z ruchem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zapewnia trójwymiarową aktywację roztworów.
- > Unikalny kształt i konstrukcja końcówki EQ-S wytwarza większą siłę, która poprawia przepływ środka irygacyjnego w małych kanałach.
- > Rozmiary końcówek:
Small - 15/02 biała
Medium - 25/02 czerwona
Large - 35/02 zielona
- > Długość końcówek 23 mm z oznaczeniem na 18 mm i 20 mm.
- > Czas pracy - 9 godzin.

-20%



1800 zł ~~2250 zł~~

EQ-SG EQ-S Gray,
urządzenie do aktywacji płynów w kanale, 1 szt.

EQ-SP EQ-S Pink,
urządzenie do aktywacji płynów w kanale, 1 szt.



CeraSeal

Biokompatybilny materiał bioceramiczny
do wypełniania kanałów

- > Świetna zdolność uszczelniania.
- > Szczelne wypełnienie i ochrona przed rozprzestrzenianiem się bakterii.
- > Działanie przeciwbakteryjne dzięki wysokiej wartości pH wodorotlenku wapnia.

-40%



456 zł ~~760 zł~~

CeraSeal

1 strzykawka 2 g, końcówki dokanałowe x 15 szt.



1 zł ~~132 zł~~

FG55216 Primma Art

kompozyt do prac tymczasowych,
A2, strzykawka 7 g

Igły do EQ-V

-20%



Igły do pistoletu

EQVRNEED23

Rozmiar 23G, 6 szt.

260 zł ~~325 zł~~

Igły do pistoletu

EQVRNEED25

Rozmiar 25G, 6 szt.

260 zł ~~325 zł~~

Igły do pistoletu

EQVRNEED2325

Asortyment 23G, 25G, 6 szt.

260 zł ~~325 zł~~

Biner LC



Materiał podkładowy

Materiał chroniący miążgę zęba,
materiał podkładowy pod materiały
wypelniające.

Biner LC

Strzykawki, 2 x 2 g

80 zł





ZNAK ROZPOZNAWCZY
TWOJEGO UŚMIECHU



FGM Dental Group

Historia firmy rozpoczęła się w 1996 roku wraz z opracowaniem pierwszego brazylijskiego preparatu do wybielania zębów, obecnie znanego na całym świecie jako Whiteness Perfect.

Misją firmy jest oferowanie bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań dla stomatologów promujących zdrowie i estetykę jamy ustnej pacjentów.



+400
PRODUKTÓW

FGM oferuje kompletne portfolio produktów z zakresu stomatologii estetycznej, wybielania, implantów, biomateriałów.

+100
KRAJÓW

FGM wykracza poza granice. Marka obecna w ponad 100 krajach, a w wielu z nich jest liderem sprzedaży.

+50 000
PROFESJONALISTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem podczas około 2000 kursów organizowanych rocznie.

We transform
smiles
in
more
than **100** *countries*



Vittra APS Kit Essential

-40%

Wysoce estetyczny kompozyt
w technologii APS

Zestaw 6 strzykawk kompozytu
wraz z bondem i wytrawiaczem.

Technologia APS zapewnia dłuższy czas
pracy w oświetleniu oraz przewidywalność
odcienia. Kompozyt posiada zwiększone
właściwości mechaniczne dzięki zawartości
krzemianu cyrkonu oraz doskonałą polero-
walność na wysoki potysk jak i idealną
konsystencję.



660 zł ~~1100 zł~~

FG13834 Vittra APS Kit Essential
6 strzykawk (DA1, DA2, DA3, EA1, EA2, TRANS N)
bond Ambar APS, wytrawiacz Condac 37%



1 zł ~~210 zł~~

FG19361 Ambar Universal APS
butelczka, 5 ml

Vittra APS Unique

-25%

Unikalny jednostrzykawkowy kompozyt z efektem kameleona

- > Kompozyt w technologii APS.
- > Uniwersalny kolor; tylko jeden odcień od A1 do D4 - wszystkie kolory można uzyskać jednym odcieniem.
- > W większości przypadków nie jest wymagane stosowanie warstwowej techniki odbudowy.
- > Odpowiednia zawartość wypełniacza, optymalna przezierność oraz wysoka estetyka systemu APS pozwalają na perfekcyjne odwzorowanie naturalnego koloru zęba.

FG55212 Vittra APS Unique
strzykawka 4 g

132 zł ~~176 zł~~



+



PUREsthetic

1 zł ~~40 zł~~

Dowolny zestaw PUREsthetic Restoration Kit (do wyboru ze strony 35-36)

* Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Poldent sp. z o.o. Produkty gratisowe są przesyłane z biura Poldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.

Diamond Excel Ultrafine

Uniwersalna diamentowa pasta do polerowania

- > Doskonała konsystencja, nie sływa z miejsca aplikacji (efekt tiksotropowy).
- > Zawarty w paście mikronizowany diament zapewnia dodatkową twardość, która ułatwia polerowanie.
- > Ścieralność 0,5 microna.

BESTSELLER

143 zł

FG55820 Diamond EXCEL ULTRAFINE
- 1 strzykawka 2 g



Przy zakupie Diamond Excel Ultrafine 2 pasty po 1 zł.

+



1 zł ~~74 zł~~

FG02092 Diamond R
ścieralność 6-8 mikrona
1 strzykawka 4 g



1 zł ~~66 zł~~

FG02091 Diamond Excel
ścieralność 2-4 mikrona
1 strzykawka 2 g

Ambar Universal APS

Samowytwardzający, światłoutwardzalny,
bezbarwny system wiążący



FG19361 Ambar Universal APS
buteleczka, 5 ml

210 zł



Diamond Felts

Dyski filcowe do polerowania

Doskonałe polerowanie na różnych
nieregularnych i skośnych powierzchniach.



FG02096 Diamond Felts 8 / 12 mm
Asortyment 24 szt., mandrela

94 zł





5X



**SYSTEM WHITENESS PERFECT OTRZYMAŁ
W USA PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ DENTAL
ADVISOR ZA NAJLEPSZY PREPARAT DO
WYBIELANIA ZĘBÓW**



Zestawy do wybielania



White Class 6% / Whiteness Perfect 16%



White Class 6%

Żel wybielający z nadtlenkiem wodoru w stężeniu 6% do stosowania w domu pod nadzorem lekarza stomatologa.

FG07447 White Class 6%

4 strzykawkę żelu po 3 g, 4 końcówki aplikatora
1 pudełko na nakładki, 1 karta następnej wizyty,
instrukcja użycia dla pacjenta i dla lekarza.

215 zł

Whiteness Perfect 16%

Żel wybielający z nadtlenkiem karbamiidu w stężeniu 16% do stosowania w domu pod nadzorem lekarza stomatologa.

FG07462 Whiteness Perfect 16%

5 strzykawkę po 3 g, 5 końcówek aplikatora,
2 płytki winylowe o grubości 1 mm
do przygotowania nakładek,
1 pudełko na nakładki.

193 zł

Strzykawkki do wybielania

Bezpieczne stężenia



White Class 6%

Żel wybielający z nadtlkiem wodoru w stężeniu 6% do stosowania w domu pod nadzorem lekarza stomatologa.

FG07448 White Class 6%

6% nadtlku wodoru, 1 strzykawkka 3 g

25 zł

Whiteness Perfect 16%

Żel wybielający z nadtlkiem karbamidu w stężeniu 16% do stosowania w domu pod nadzorem lekarza stomatologa.

FG07463 Whiteness Perfect 16%

16% nadtlku karbamidu, 1 strzykawkka 3 g

30 zł



NOWOŚĆ
Nakładki termokurcziwe
na dolny i góry tuk zębony
2 szt.

13 zł

PUREsthetic Restoration Kits

Gotowe zestawy do odbudowy estetycznej

PUREsthetic



40 zł

ZESTAW DO ZĘBÓW TRZONOWYCH PRAWOSTRONNYCH NR 1 PSO6001 PUREsthetic Restoration Kit no. 1 molar on right-sided

PUREsthetic Anatomical Matrix Band – paski do formówek tłoczone, typ 24, trzonowe prawostronne, 16 szt.,
PUREsthetic Self-locking strips – paski samozaciskowe, typ 24, trzonowe prawostronne, 10 szt.,
PUREsthetic Matrix Bands – paski do formówek profilowane, typ 13, trzonowe jednostronne, 16 szt.



40 zł

ZESTAW DO ZĘBÓW TRZONOWYCH LEWOSTRONNYCH NR 2 PSO6002 PUREsthetic Restoration Kit no. 2 molar on left-sided

PUREsthetic Anatomical Matrix Band – paski do formówek tłoczone, typ 23, trzonowe lewostronne, 16 szt.,
PUREsthetic Self-locking strips – paski samozaciskowe, typ 23, trzonowe lewostronne, 10 szt.,
PUREsthetic Matrix Bands – paski do formówek profilowane, typ 13, trzonowe jednostronne, 16 szt.



40 zł

ZESTAW DO ZĘBÓW TRZONOWYCH OBUSTRONNYCH NR 3 PSO6003 PUREsthetic Restoration Kit no. 3 molar on both sides

PUREsthetic Anatomical Matrix Band – paski do formówek tłoczone, typ 29, zęby trzonowe obustronne, 16 szt.,
PUREsthetic Self-locking strips – paski samozaciskowe, typ 29, zęby trzonowe obustronne, 10 szt.,
PUREsthetic Matrix Bands – paski do formówek profilowane, typ 9, zęby trzonowe obustronne, 16 szt.

PUREsthetic Restoration Kits

Gotowe zestawy do odbudowy estetycznej

PUREsthetic



36 zł

ZESTAW DO ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH PRAWOSTRONNYCH NR 4 PSO6004 PUREsthetic Restoration Kit no. 4 premolar right-sided

PUREsthetic Anatomical Matrix Band – paski do formówek tłoczone, typ 22, przedtrzonowe prawostronne, 16 szt.,
PUREsthetic Matrix Bands – paski do formówek profilowane, typ 12, przedtrzonowe jednostronne, 16 szt.,
PUREsthetic Polyester Matrix Strips – taśma poliestrowa, szerokość 8 mm, grubość 0,05 mm, 15 mb, 1 szt.



36 zł

ZESTAW DO ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH LEWOSTRONNYCH NR 5 PSO6005 PUREsthetic Restoration Kit no. 5 premolar left-sided

PUREsthetic Anatomical Matrix Band – paski do formówek tłoczone, typ 21, przedtrzonowe lewostronne, 16 szt.,
PUREsthetic Matrix Bands – paski do formówek profilowane, typ 12, przedtrzonowe jednostronne, 16 szt.,
PUREsthetic Polyester Matrix Strips – taśma poliestrowa, szerokość 8 mm, grubość 0,05 mm, 15 mb, 1 szt.



36 zł

ZESTAW DO ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH OBUSTRONNYCH NR 6 PSO6006 PUREsthetic Restoration Kit no. 6 premolar on both sides

PUREsthetic Anatomical Matrix Band – paski do formówek tłoczone, typ 28, przedtrzonowe obustronne, 16 szt.,
PUREsthetic Matrix Bands – paski do formówek profilowane, typ 8, przedtrzonowe obustronne, 16 szt.,
PUREsthetic Polyester Matrix Strips – taśma poliestrowa, szerokość 8 mm, grubość 0,05 mm, 15 mb, 1 szt.

PUREsthetic

Paski do formówek tłoczone
i paski samozaciskowe



PS01021
PUREsthetic Anatomical Matrix Band

Paski do formówek tłoczone, typ 21, przedtrzonowe lewostronne, 16 szt.


9,75 zł ~~13 zł~~



PS01022
PUREsthetic Anatomical Matrix Band

Paski do formówek tłoczone, typ 22, przedtrzonowe prawostronne, 16 szt.

9,75 zł ~~13 zł~~

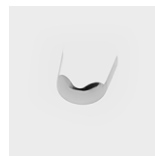

PS01028
PUREsthetic Anatomical Matrix Band

Paski do formówek tłoczone, typ 28, przedtrzonowe obustronne, 16 szt.

9,75 zł ~~13 zł~~



PS01023
PUREsthetic Anatomical Matrix Band

Paski do formówek tłoczone, typ 23, trzonowe lewostronne, 16 szt.

9,75 zł ~~13 zł~~



PS01024
PUREsthetic Anatomical Matrix Band

Paski do formówek tłoczone, typ 24, trzonowe prawostronne, 16 szt.

9,75 zł ~~13 zł~~



PS01029
PUREsthetic Anatomical Matrix Band

Paski do formówek tłoczone, typ 29, trzonowe obustronne, 16 szt.

9,75 zł ~~13 zł~~



PS02023
PUREsthetic Self-locking strips

Paski samozaciskowe, typ 23, trzonowe lewostronne, 10 szt.

18 zł ~~24 zł~~



PS02024
PUREsthetic Self-locking strips

Paski samozaciskowe, typ 24, trzonowe prawostronne, 10 szt.

18 zł ~~24 zł~~



PS02029
PUREsthetic Self-locking strips

Paski samozaciskowe, typ 29, trzonowe obustronne, 10 szt.

18 zł ~~24 zł~~

PUREsthetic Matrix Bands

Paski do formówek profilowane

PUREsthetic



PS03008 PUREsthetic Matrix Bands
Paski do formówek profilowane, typ 8,
przedtrzonowe obustronne, 16 szt.

7 zł



PS03009 PUREsthetic Matrix Bands
Paski do formówek profilowane, typ 9,
trzonowe obustronne, 16 szt.

7 zł



PS03012 PUREsthetic Matrix Bands
Paski do formówek profilowane, typ 12,
przedtrzonowe jednostronne, 16 szt.

7 zł



PS03013 PUREsthetic Matrix Bands
Paski do formówek profilowane, typ 13,
trzonowe jednostronne, 16 szt.

7 zł

PUREsthetic Polyester Matrix Strips

Taśma poliestrowa gładka

PS05G05 PUREsthetic Polyester Matrix Strips
szerokość 8 mm, grubość 0,05 mm, długość 15 mb

17,- -20,-



-15%
PRZY ZAKUPIE
3 OPAKOWAŃ

PUREsthetic Prophylactic Strips

Paski do profilaktyki


Paski perforowane są nieodzowną pomocą przy profilaktyce usuwania pozostałości płytki nazębnej, kamienia i plam z powierzchni międzyzębowych bez szlifowania i uszkodzania szkliva zęba.



PS04000 PUREsthetic Prophylactic Strips

grubość 0,05 mm, szerokość 4 mm, długość 100 mm.
10 szt.

16,15 zł ~~19 zł~~

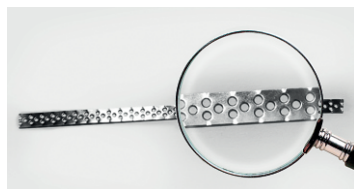

Kalka artykulacyjna

Dwustronna, 80µ

nowość



Kalka artykulacyjna do kontroli zgryzu idealnie dopasowująca się do powierzchni okluzyjnych. Przeznaczona dla stomatologów i protetyków. Dwustronnie barwiona, kolor niebiesko-czerwony, kształt litery I i U.

PS8080 PUREsthetic Articulating Paper

Kształt I, 80µ, dwustronna, 144 arkusze

PS8090 PUREsthetic Articulating Paper

Kształt U, 80µ, dwustronna, 72 arkusze

35 zł



S3 Blue

Poldent®
CHIRURGIA IMPLANTY

Laser stomatologiczny S3 BLUE
980nm, 450nm, 650nm

PIOSON



52 500 zł

PIOS3 Laser S3, zestaw

Laser o 3 długościach fali idealnie nadaje się do skutecznego i kompleksowego leczenia chorób jamy ustnej.

980 nm (podczerwona) to tradycyjny laser diodowy na podczerwień.

450 nm (niebieska) to idealna długość fali do cięcia tkanek miękkich.

650 nm (czerwona) jest rozpoznawana jako efekt LLLT (fotobiomodulacja).

Przykładowe zastosowanie:

- > dezynfekcja kanałów,
- > koagulacja,
- > kiretaż zamknięty,
- > leczenie dziąseł,
- > terapia TMJ/TMD,
- > dezynfekcja kieszonek dziąsłowych,
- > chirurgia tkanek miękkich,
- > leczenie chorób jamy ustnej,
- > leczenie nadwrażliwości,
- > wybielanie zębów.

SurgyStarX

Polident®
CHIRURGIA IMPLANTY

Ultradźwięki do precyzyjnych zabiegów chirurgicznych

- > Łatwe i precyzyjne sterowanie.
- > Rekomendacje dotyczące końcówek roboczych (dopasowanie ich do zabiegu).
- > Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej.
- > Różne tryby pracy.
- > Tymczasowy wzrost mocy dzięki funkcji Boost.
- > Niewielka i lekka rękojeść ze światłem LED.
- > 12 różnych końcówek o dużej odporności mechanicznej, a jednocześnie bardzo cienkich (np. BS01 to tylko 0,42 mm).
- > Perfekcyjne chłodzenie, dokładny i jednorodny przepływ wody podczas zabiegu.
- > Niewielka waga (1,91 kg) i rozmiar (315x235x115 mm).



12240 zł ~~15300 zł~~

DMSURGYHANDPC	Rękojeść do chirurgii do urządzenia SurgyStar	3 600 zł
DMBS01	Końcówka BS01, pita	400 zł
DMBS1S	Końcówka BS1S, krótka pita	400 zł
DMBS2L	Końcówka BS2L, pita zagięta lewostronnie	400 zł
DMBS2R	Końcówka BS2R, pita zagięta prawostronnie	400 zł
DMRS01	Końcówka RS01, zaokrąglona pita	400 zł
DMEX01	Końcówka EX01, płaska	400 zł
DMHBO1	Końcówka HBO1, trójkątna	400 zł
DMHBO2	Końcówka HBO2, zaokrąglona	400 zł
DMEX02	Końcówka EX02, pokryta nasypem diamentowym, zaokrąglona	400 zł
DMEX03	Końcówka EX03, pokryta nasypem diamentowym, płaska	400 zł
DMCA00	Końcówka CA00, do mikro-perforacji	400 zł
DMSLO1	Końcówka SLO1, zaokrąglona, "tępa"	400 zł
DMBW	Klucz do końcówek	200 zł
DMBRAY	Tacka	400 zł
DMIBS	Wężyki, zestaw do wielokrotnego użytku	320 zł
DMIB	Wężyki, jednorazowe, zestaw 10 szt.	400 zł
DMFS	Pedał do urządzenia	640 zł

Ora-Aid

Poldent[®]
CHIRURGIA IMPLANTY

Samoprzylepny opatrunek
wewnętrzny

-10%

- > Wykorzystywany przy zabiegach implantacji, ekstrakcji zębów, leczeniu i zabiegach chirurgicznych przyzębia, leczeniu ortodontycznym.
- > Pomocny w hemostazie i szybkim gojeniu ran.

BBM-OB23 ORA AID
25 x 15 mm, 20 szt. **195,30 zł** ~~217 zł~~

BBM-OB51 ORA AID
50 x 15 mm, 20 szt. **376 zł**



ZMatrix

Membrana kolagenowa resorbowalna

-20%

- > Zaprojektowana tak, aby łatwo pokrywała ubytek, a sama się nie „sklejała”.
- > Może być zakładana w dowolną stronę.
- > Łatwe docinanie do pożądanego kształtu.
- > Dłuższy, przewidywany czas resorpcji zapobiegający zanikaniu augmentowanego materiału.
- > Wspomaga gojenie się kości oraz przyrost tkanki łącznej.



OSZM1520	ZMatrix membrana kolagenowa 15 mm x 20 mm, 1 szt.	670 zł	536 zł
OSZM2530	ZMatrix membrana kolagenowa 25 mm x 30 mm, 1 szt.	885 zł	708 zł
OSZM3040	ZMatrix membrana kolagenowa 30 mm x 40 mm, 1 szt.	1120 zł	896 zł

Nici SMI

PoIdent[®]
CHIRURGIA IMPLANTY

Doskonałej jakości belgijskie
nici chirurgiczne



S4101516	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 1, 5/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S4151516-75	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 1.5, 4/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S4101519	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS19 mm, r. 1, 5/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S4151519-75	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS19 mm, r. 1.5, 4/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S4201519	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS19 mm, r. 2, 3/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S4071516	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 0.7, 6/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S4201516-75	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 2, 3/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S11150117	Nici SURGICRYL PGA, okr., taper point, 1/2 k., HR17 mm, r. 1.5, 4/0, 75 cm, fioletowe, 12 szt.	120 zł	90 zł
S11151519	Nici SURGICRYL PGA, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS19 mm, r. 1.5, 4/0, 75 cm, fioletowe, 12 szt.	120 zł	90 zł
S11100117	Nici SURGICRYL PGA, okr., taper point, 1/2 k., HR17 mm, r. 1, 5/0, 75 cm, fioletowe, 12 szt.	120 zł	90 zł
S11101519	Nici SURGICRYL PGA, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS19 mm, r. 1, 5/0, 75 cm, fioletowe, 12 szt.	120 zł	90 zł
S9151516-45	Nici DACLON, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 1.5, 4/0, 45 cm, niebieskie, 12 szt.	57 zł	42,75 zł
S9151516	Nici DACLON, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 1.5, 4/0, 75 cm, niebieskie, 12 szt.	57 zł	42,75 zł
S9101516	Nici DACLON, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 1, 5/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	57 zł	42,75 zł

K2 Mobile Hulaser

Lekki, ergonomiczny laser diodowy

Mały i bardzo wygodny laser o wszechstronnym zastosowaniu:
chirurgia, periodontologia, endodoncja, ortodoncja, wybielanie.

- > System AFL - jedyny na świecie laser z regulowaną długością światłowodu.
- > Niewielkie rozmiary, pełna mobilność i ergonomiczność.
- > Moc dzięki technologii HECOSA.

11645 zł ~~13700 zł~~

K2MOBILE Laser K2 Mobile

laser K2 Mobile, 1 szt.,
ładowarka i przewód sieciowy, 1 szt.,
bateria, 2 szt.,
okulary ochronne, 2 szt.,
kalibrator do włókna, 1 szt.,
światłowód 400 um, 2 szt.,
światłowód 300 um, 1 szt.

2015 2016
HULASER
LASER DIODOWY



Poldent[®]
CHIRURGIA IMPLANTY

SWAN+

Lampa do polimeryzacji o szerokim spektrum z wymiennymi magnetycznymi soczewkami punktowymi

- > Możliwość ustawienia wielu różnych trybów i godzin pracy.
- > Stała moc światła, spadek mocy baterii nie wpłynie na efekt utwardzania.
- > Bateria o dużej pojemności. Po pełnym naładowaniu, poniżej 10 sekund światła na raz, może być używana nieprzerwanie ponad 500 razy.

SPECJALNE, MAGNETYCZNE SOCZEWKI UTWARDZAJĄCE:

- > **Soczewka Microcure:** tworzy obszar utwardzania o średnicy 2,5 mm, aby pomóc w utwardzaniu pozycyjnym.
- > **Microcure Ball Lens:** utrzymuje matrycę przed kontaktem podczas utwardzania kompozytu do uzupełnień klasy II.
- > **Endo Guide Lens:** do uzupełnień wierzchołkowych, wąskich preparacji.

SWAN+ Lampa do polimeryzacji
1 szt.

1592 zł
~~1990 zł~~

-20%


Specjalne magnetyczne soczewki utwardzające



Microcure Ball Lens



Microcure Ball Lens

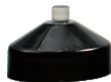

Microcure Lens



Endo Guide Lens

Direct Veneer

Licówki pakowane po 1 szt



edelweiss
DENTISTRY




Licówki, 1 szt.

ED10150 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 11 S
ED10151 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 11 M
ED10152 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 11 L
ED10153 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 12 S
ED10154 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 12 M
ED10155 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 12 L
ED10156 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 13 S
ED10157 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 13 M
ED10158 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 13 L
ED13100 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 14 S
ED13101 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 14 M
ED13102 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 14 L
ED13103 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 15 S
ED13104 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 15 M
ED13105 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 15 L
ED10159 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 21 S
ED10160 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 21 M
ED10161 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 21 L
ED10162 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 22 S
ED10163 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 22 M
ED10164 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 22 L
ED10165 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 23 S
ED10166 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 23 M
ED10167 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 23 L
ED13106 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 24 S

ED13107 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 24 M
ED13108 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 24 L
ED13109 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 25 S
ED13110 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 25 M
ED13111 Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 25 L
ED10168 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 31 S
ED10169 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 31 M
ED10170 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 32 S
ED10171 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 32 M
ED10172 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 33 S
ED10173 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 33 M
ED13112 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 34 S
ED13113 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 34 M
ED13114 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 35 S
ED13115 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 35 M
ED10174 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 41 S
ED10175 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 41 M
ED10176 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 42 S
ED10177 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 42 M
ED10178 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 43 S
ED10179 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 43 M
ED13116 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 44 S
ED13117 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 44 M
ED13118 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 45 S
ED13119 Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 45 M

KENDA Maximus

Gumki do polerowania

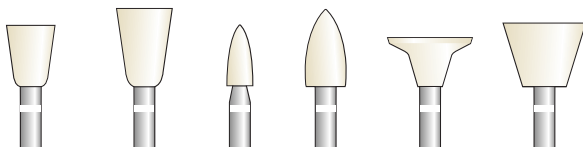

-20%

KENDA

124 zł ~~155 zł~~

Jednoetapowe gumki gumki z nasypem diamentowym do polerowania kompozytów oraz ceramiki hybrydowej. Zalecana prędkość 500-7500 RPM, nacisk 0,3-2 N. Zalecane do wykończenia licówek Direct Veneer.

KE380A_6 Gumki Maximus
z nasypem diamentowym jasnożełwe do ostatecznego opracowania i polerowania.

Paski ściernie

Do opracowywania powierzchni wypełnień w przestrzeniach proksymalnych

-20%
PRZY ZAKUPIE
3 OPAKOWAŃ



RO60026823	Stalowe paski ściernie, 4 mm, 50 µm, jednostronne, 12 szt.	24 zł	30 zł
RO60026824	Stalowe paski ściernie, 6 mm, 50 µm, jednostronne, 12 szt.	28 zł	35 zł
RO60026825	Stalowe paski ściernie, 8 mm, 50 µm, jednostronne, 12 szt.	36 zł	45 zł

Wiertła diamentowe

Precyzyjne instrumenty szwajcarskiej produkcji z naturalnymi diamentami



Wysoka wydajność szlifowania i dłuższa trwałość

- > Połączone instrumenty premium.
- > 100% naturalnego ziarna diamentu.
- > 100% kontrola jakości wizualnej.
- > Wielkości ziarna zgodne ze standardami ISO.
- > Precyzyjna kalibracja.
- > Większa ilość diamentów na mm².



●	CO60031856	801-314-012-01.2-M		95 zł
●	CO60031862	801-314-014-01.4-M		95 zł
●	CO60031867	801-314-016-01.6-M		95 zł
●	CO60032401	859-314-010-10.0-F		95 zł
●	CO60032398	859-314-010-10.0-EF		95 zł
●	CO60031756	368-314-016-03.5-F		95 zł
●	CO60031780	368-314-023-05.0-M		95 zł
●	CO60032300	856-314-016-09.0-C		110 zł
●	CO60032306	856-314-018-08.0-C		110 zł
●	CO60031828	392-314-016-08.0-F		95 zł
●	CO60032510	878-314-014-08.0-M		95 zł
●	CO60032206	850-314-016-10.0-C		110 zł
●	CO60031976	830L-314-010-04.0-M		95 zł
●	CO60031982	830L-314-012-04.0-M		95 zł

- Zielony – C (gruboziarnisty)
107–181 µm; średnia 151 µm
- Niebieski – M (medium)
64–126 µm; średnia 107 µm
- Czerwony – F (drobnoziarnisty)
27–76 µm; średnia 46 µm
- Żółty – EF
(wyjątkowo drobno-ziarnisty)
10–36 µm; średnia 25 µm

* Promocja dotyczy wybranych wiertel.

DIATECH
 ROTARY INSTRUMENTS


Ssaki chirurgiczne

Jałowe ssaki Juneland

Precyzyjne końcówki do ssaka umożliwiające dotarcie do największych miejsc zabiegowych. Dostępne w rozmiarze: 1,2/2,5mm.

JL-18008-C

Końcówki ssaka 1,2 mm / 2,5 mm,
20 szt., adapter

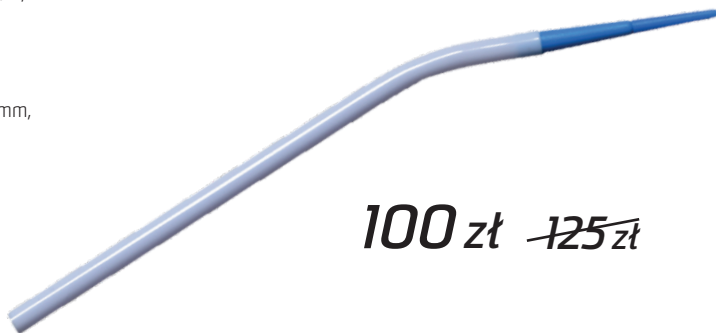

100 zł ~~125 zł~~

-20%

Troll Foil

Cienka folia artykulacyjna na ramce

- > Ultracienka, tylko 8 μ .
- > Dwustronna folia artykulacyjna na wygodnej ramce.
- > Precyzyjne znakowanie na wszystkich powierzchniach.
- > Odporna na rozdarcie, z nietoksyczną warstwą koloru.

TR12000101 TrollFoil, niebieska
folia na ramce, 100 szt.

98 zł ~~140 zł~~



-30%

Wkłady koronowo- korzeniowe

NORDIN

Pozłacane i tytanowe

Kształt cylindryczny wkładu redukuje możliwość pęknięcia korzenia spowodowanego naprężeniami. Część robocza oraz główki wkładu są skonstruowane tak, aby można było najlepiej i najłatwiej odbudować koronę zęba.


3+1
NAJTAŃSZY ZA 1 ZŁ

SPG010600_60 Wkłady pozłacane **275 zł**
Asortyment 60 szt., klucz 2 szt.

SPG010600_120 Wkłady pozłacane **410 zł**
Asortyment 120 szt., klucz 2 szt.

SPG010600_240 Wkłady pozłacane **610 zł**
Asortyment 240 szt., klucz 2 szt.

SPT010600 Wkłady tytanowe **540 zł**
Asortyment, 60 szt., klucz 2 szt.

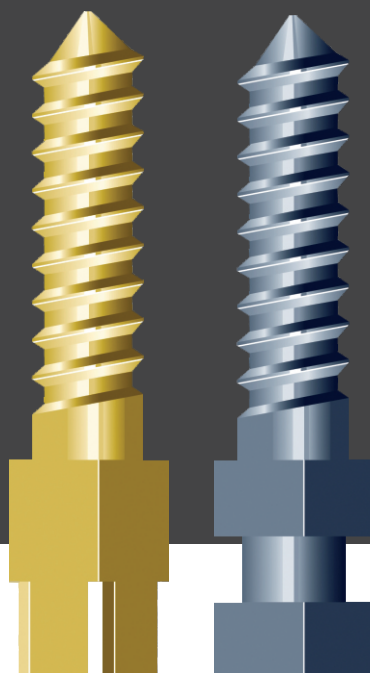

Ćwieki okotomiazgowe

Długotrwała odbudowa twardych tkanek zęba

NORDIN

3+1



RPT60 Ćwieki 0.60 mm

Ćwieki okotomiazgowe, 12 szt.,
wiertło, 1 szt.

95 zł



RPT75 Ćwieki 0.75 mm

Ćwieki okotomiazgowe, 12 szt.,
wiertło, 1 szt.

95 zł

Glassix Plus

Wkłady koronowo-korzeniowe
z włókna szklanego

-25%

337,50 ~~450 zł~~



GSPP120 Glassix PLUS
nr 1 (białe), \varnothing 1.2-0.6,
10 szt.



GSPP220 Glassix PLUS
nr 2 (żółte), \varnothing 1.5-0.8
10 szt.




GSPP320 Glassix PLUS
nr 3 (czerwone), \varnothing 1.8-0.9
10 szt.



GSPP420 Glassix PLUS
nr 4 (niebieskie), \varnothing 2.0-1.0
10 szt.


Polishette

mate, jednorazowe gumki do polerowania

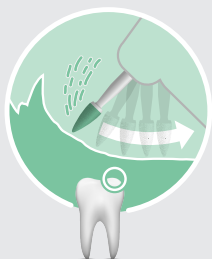

Zielone do usuwania i konturowania

- > Wyjątkowe działanie ściernie.
- > Szybki efekt pracy.

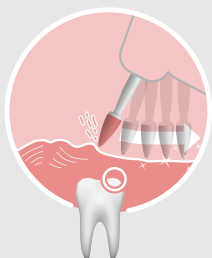


Czerwone do wszechstronnego wygładzania

- > Wygładzają kompozyty i ceramikę na wysoki połysk.
- > Usuwiają nadmiary żywic i cementów.
- > Usuwiają drobne przebarwienia.
- > Delikatne dla szkliwa.



Fioletowe do uzyskania diamentowego połysku

- > By osiągnąć wyjątkowo wysoki połysk w ciągu kilku sekund.

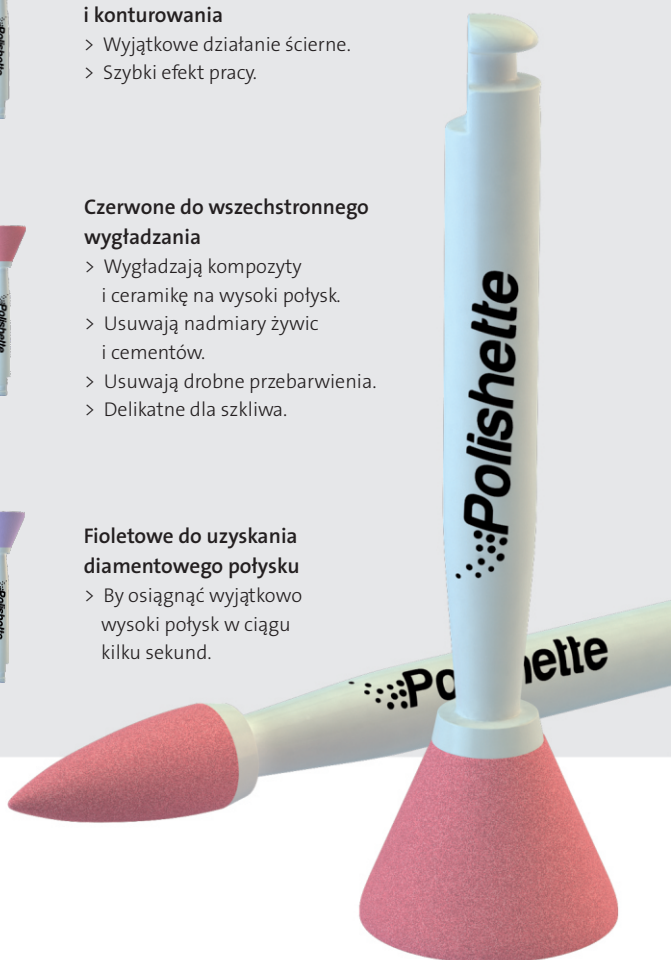

KENDA

Polishette

KENDA

-30%
PRZY ZAKUPIE
2 OPAKOWAŃ

Jednorazowe gumki do polerowania kompozytów i ceramiki




KEPS710X Gumki POLISHETTE
Asortyment 24 szt. (minikubeczki 12 szt., mini płomyki 12 szt.)
133 zł ~~190 zł~~



KEPS715X Gumki POLISHETTE
Asortyment 24 szt. minikubeczki (10 x zielone, 10 x czerwone, 4 x fioletowe)
133 zł ~~190 zł~~



KEPS716X Gumki POLISHETTE
Asortyment 24 szt. minipłomyki (10 x zielone, 10 x czerwone, 4 x fioletowe)
133 zł ~~190 zł~~

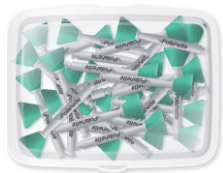


KEPS715C Gumki POLISHETTE,
Minikubeczki zielone, zgrubne, 30 szt.
133 zł ~~190 zł~~



KEPS716C Gumki POLISHETTE
Minipłomyki zielone, zgrubne, 30 szt.
133 zł ~~190 zł~~



KEPS715M Gumki POLISHETTE
Minikubeczki czerwone, wygładzające, 30 szt.
133 zł ~~190 zł~~

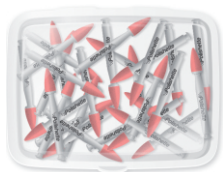

KEPS716M Gumki POLISHETTE
Minipłomyki czerwone, wygładzające, 30 szt.
133 zł ~~190 zł~~



KEPS715F Gumki POLISHETTE
Minikubeczki fioletowe, do nabtyszczenia, 10 szt.
133 zł ~~190 zł~~



KEPS716F Gumki POLISHETTE
Minipłomyki fioletowe, do nabtyszczenia, 10 szt.
133 zł ~~190 zł~~

Premium Plus

Gumki i szczotki do profilaktyki

-20%

- > Pakowane po 20 szt., jednorazowe, niesterylne gumki i szczoteczki niezawierające lateksu i BPA.
- > Gumki posiadają zewnętrzne wypustki polerujące przestrzeń międzyzębową oraz wewnętrzne „blaszki” i „żeberka” w układzie Turbine utrzymujące pastę polerską.
- > Przeznaczone do kątnicy.
- > Ze względu na budowę i wymiary trzonka gumki i szczoteczki nie pasują do połączenia z prostnicą.
- > Prędkość pracy ze wszystkimi gumkami i szczoteczkami: 1,500-3,000 rpm.



PPS262F-20
Prophy Brushes RA Flat Nylon,
20 szt., Soft Clear

16 zł ~~20 zł~~



PPS262T-20
Prophy Brushes RA Tapered
Nylon, 20 szt., Soft Clear

16 zł ~~20 zł~~



PPS268-20
Prophy Brushes RA Junior Cup
Nylon, 20 szt., Soft Clear

24 zł ~~30 zł~~



PPX262F-20
Prophy Brushes RA
Flat Nylon, 20 szt.
Extra Soft Yellow

16 zł ~~20 zł~~



PPX268-20
Prophy Brushes RA
Junior Cup Nylon, 20 szt.
Extra Soft Yellow

24 zł ~~30 zł~~



PPTM222DB-20
Prophy Cup RA
Metal Turbine, 20 szt.
Soft Dark Blue

16 zł ~~20 zł~~



PPTM222YL-20
Prophy Cup RA
Metal Turbine, 20 szt.
Extra Soft Yellow

16 zł ~~20 zł~~

dr Filippo Cardinali w Polsce

05.10.2024, Warszawa, Sound Garden Hotel,
ul. Żwirki i Wigury 18



Do zakupów za 1500 zł produktów endo★star
pakiet 1 tylko za 1 zł



PROGRAM:

WYKŁAD 1

Znaczenie obturacji
w endodoncji:
Od technik na zimno
do technik na ciepło
z zastosowaniem EQ-V.

WYKŁAD 2

Od technik na ciepło
do technik na zimno:
Bioceramiczna
rewolucja.

WYKŁAD 3

Bioceramika
bez tajemnic:
wskazówki dotyczące
prawidłowego
wypełnienia
z CeraSeal.

PAKIET 1 - 750 zł
PAKIET 2 - 1000 zł

Pełny program
i więcej szczegółów
drcardinali.grwebsite.pl



Kontakt: Poldent, Sylwia Purzycka, tel.: 667302305, e-mail.: s.purzycka@poldent.pl



Cut&Fit

NOWOŚĆ

Kompaktowe narzędzie do docinania
ćwieków gutaperkowych

- > Doskonale dopasowany rozmiar dociętego ćwieka gutaperkowego.
- > Bezpiecznie wbudowane ostrze.
- > Precyzyjne cięcie, które pozostawia gładką powierzchnię ćwieka.
- > Wysoka trwałość.

CUTFIT Cut&Fit
1 szt.

96 zł ~~120 zł~~

-20%



Zapraszamy do kontaktu z naszymi Promotorami
(dane kontaktowe str. 2)

Materiał reklamowy przeznaczony tylko dla profesjonalistów w dziedzinie Wyrobów Medycznych.
Rabaty nie łączą się. Możliwe błędy w druku. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Poldent sp. z o.o.
ul. Dzika 2
00-194 Warszawa
Tel.: 22 351 7 650
poldent@poldent.pl
www.poldent.pl



Poldent[®]