

Końcówki  
robocze  
**Piezomed**



## Dlaczego technologia piezo?

Urządzenie Piezomed udostępnia specjalistom chirurgii stomatologicznej wszystkie zalety innowacyjnej technologii ultradźwiękowej. Mikrowibracje wysokiej częstotliwości umożliwiają cięcie z niewiarygodną precyzją. Ponadto dzięki nim na skutek tak zwanego efektu kawitacji w polu operacyjnym prawie nie występuje krwawienie podczas zabiegu.



### Minimalnie inwazyjna, maksymalnie efektywna - technologia ultradźwiękowa w chirurgii jamy ustnej

- > Automatyczne rozpoznawanie instrumentu.
- > Trzy indywidualne tryby pracy.
- > Dzięki funkcji Boost krótkotrwałe zwiększenie mocy o 20%.
- > Idealne oświetlenie pola operacyjnego dzięki diodowemu oświetleniu pierścieniowemu LED.
- > Efektywne chłodzenie dzięki ujęciu sprayu blisko obszaru roboczego instrumentu.
- > Prostownicę z LED i rękawem można poddać dezynfekcji termicznej i sterylizacji.



## Końcówki robocze do chirurgii kostnej

Niewielkie zęby tnące  
piły - więcej zębów  
na instrumencie  
- ustanawia nowe  
standardy w zabiegach  
preparacji kości.




### B1 (REF 05530100)

Piła z drobnym ząbkowaniem umożliwiającą precyzyjne cięcie i powodującą niewielkie ubytki kości podczas usuwania bloku kostnego.



### B2R, B2L (REF 06958600, 05544400)

Piła z drobnym ząbkowaniem umożliwiającą poziome cięcie, powodującą niewielkie ubytki kości w trudno dostępnych obszarach. Dostępna w wersji wygiętej w prawo i w lewo.

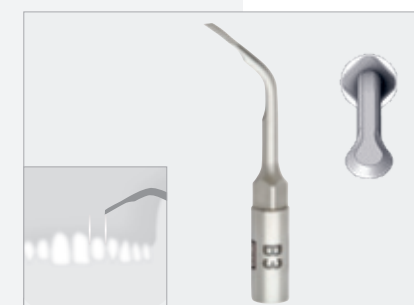

### B3 (REF 05542100)

Ostra końcówka do modelowania i konturowania powierzchni kości oraz zbierania wiórów kostnych.




### B4 (REF 05543800)

Ostre dłuto do rozszczepiania wyrostka zębodołowego.



### B5 (REF 05534500)

Skrobaczka kostna do zbierania wiórów kostnych i oddzielania płatów kości.

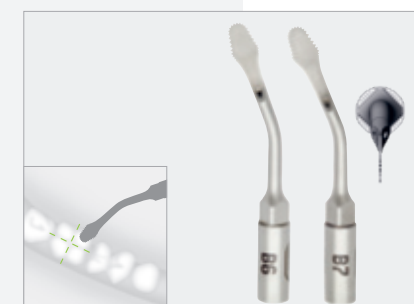


### B6, B7 (REF 07022500, 07022600)


Specjalna piła do precyzyjnego i głębokiego cięcia w wyjątkowo krótkim czasie. Przeznaczona również do oddzielania korzeni zębów oraz resekcji wierzchołka korzenia zęba.

## Końcówki robocze do periodontologii i ekstrakcji


Instrumenty do dokładnego oczyszczenia powierzchni korzeni zęba oraz do atraumatycznej ekstrakcji zęba.

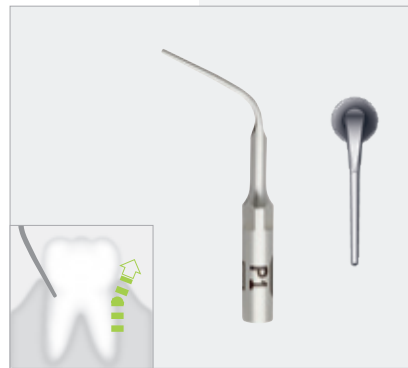


**P1** (REF 06067700)  
Końcówka do poddziastowego usuwania kamienia. Idealna do zabiegów w głębokich kieszonkach periodontalnych.

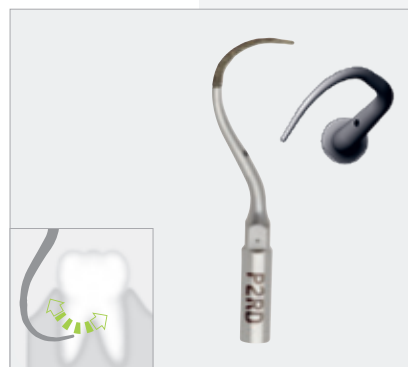


**P2RD** (REF 06061700)  
Wygięta w prawo, pokryta diamentem końcówka do czyszczenia ran okołożębowych. Nadaje się zwłaszcza do otwartego wygładzania powierzchni korzeni.

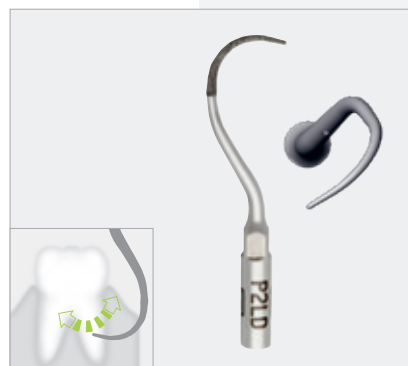

**P2LD** (REF 06061800)  
Wygięta w lewo, pokryta diamentem końcówka do czyszczenia ran okołożębowych. Nadaje się zwłaszcza do otwartego wygładzania powierzchni korzeni.

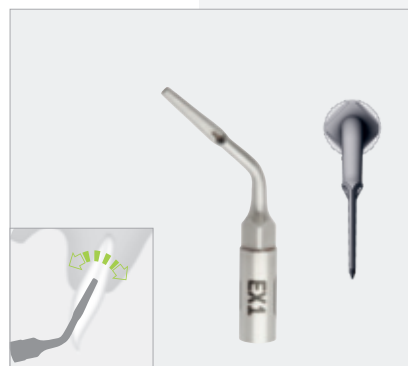


**EX1** (REF 06069300)  
Końcówka do atraumatycznej ekstrakcji zęba chroniąca kość wyrostka okołożębowego.

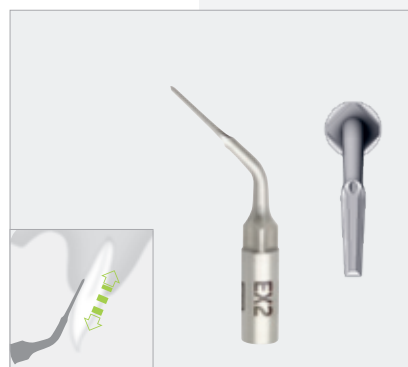


**EX2** (REF 06071100)  
Końcówka do atraumatycznej ekstrakcji zęba chroniąca kość wyrostka okołożębowego.

## Końcówki robocze do wstecznego opracowywania kanałów


Pokryte diamentem i delikatne instrumenty do łatwego dojścia w trakcie wstecznego opracowywania kanału korzeniowego.

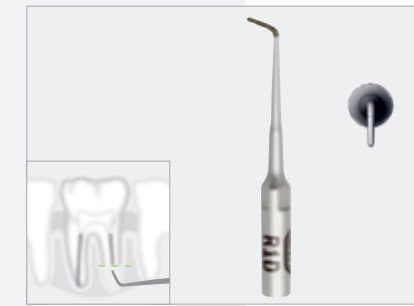


**R1D** (REF 05975200)  
Prosta, pokryta diamentem końcówka do wstecznego opracowywania kanału korzeniowego.

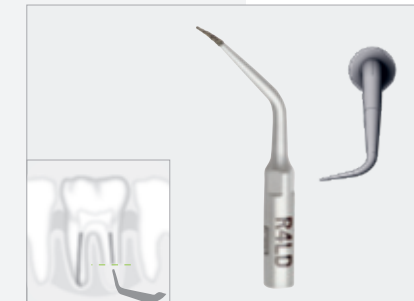


**R2RD** (REF 05991000)  
Nieznacznie wygięta w prawo, pokryta diamentem końcówka przeznaczona do wstecznego opracowywania kanału korzeniowego.

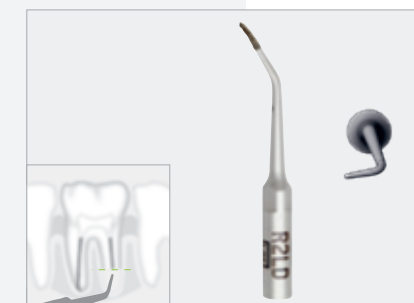


**R2LD** (REF 05999400)  
Nieznacznie wygięta w lewo, pokryta diamentem końcówka przeznaczona do wstecznego opracowywania kanału korzeniowego.

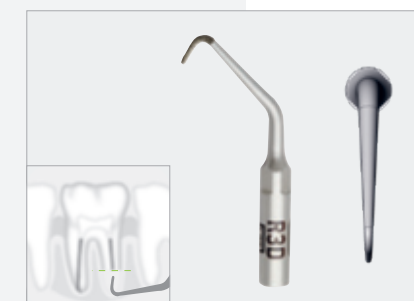

**R3D** (REF 05998800)  
Wygięta, pokryta diamentem końcówka przeznaczona do wstecznego opracowywania kanału korzeniowego.

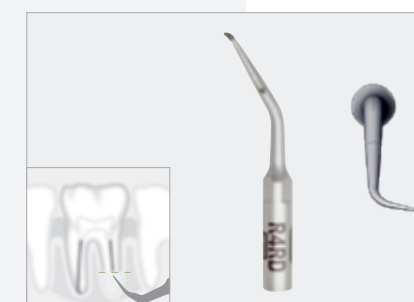


**R4RD** (REF 06005000)  
Silnie wygięta w prawo, pokryta diamentem końcówka przeznaczona do wstecznego opracowywania kanału korzeniowego.

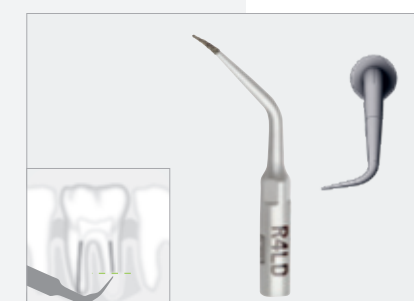

**R4LD** (REF 06004700)  
Silnie wygięta w lewo, pokryta diamentem końcówka przeznaczona do wstecznego opracowywania kanału korzeniowego.


## Końcówki robocze do zabiegu podniesienia dna zatoki z dostępu bocznego

Instrumenty pozwalają na bezpieczną boczną preparację ścianki zatoki szczękowej oraz atraumatyczne oddzielenie błony Schneidera.

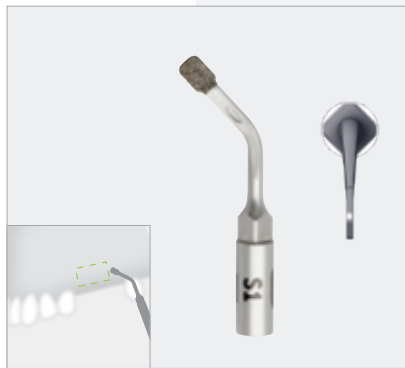


**S1** (REF 05542900)

Pokryta diamentem końcówka do przygotowywania płatów kości w zabiegu podniesienia dna zatoki oraz wydłużenia krawędzi korony.

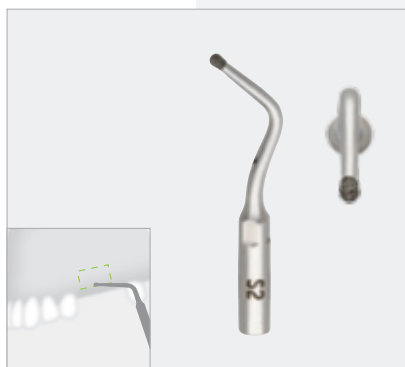


**S2** (REF 05534700)

Końcówki z diamentową kulką do przygotowywania płatów kości w zabiegu podniesienia dna zatoki i przedłużenia krawędzi korony.

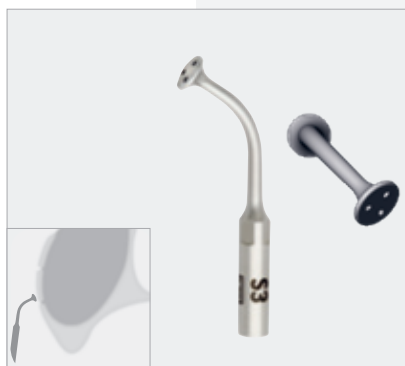


**S3** (REF 05508200)

Końcówka do łagodnego oddzielenia błony Shneiderian od kości. Trzy otwory wylotowe sprazu zabezpieczają błonę Schneidera, tworząc cienką warstwę płynu chłodzącego.

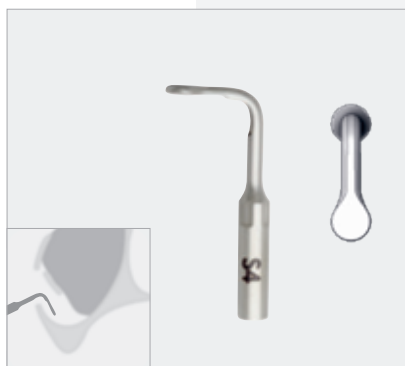

**S4** (REF 05542300)

Końcówka o zaokrąglonych krawędziach do atraumatycznego oddzielania błony Schneiderian.

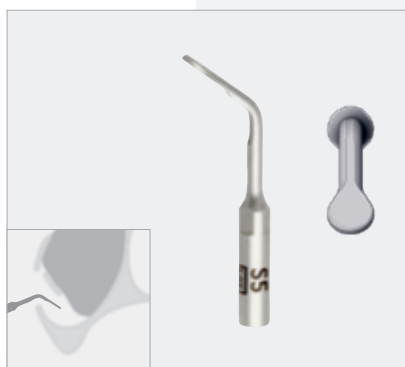

**S5** (REF 05542800)

Końcówka o zaokrąglonych krawędziach do atraumatycznego oddzielania błony Schneiderian.



Profesjonalne doradztwo,  
wsparcie sprzedażowe,  
prezentacje w gabinecie:  
Piotr Cieślak, tel.: 607 218 211



**Poldent sp. z o.o.**  
ul. Dzika 2  
00-194 Warszawa  
Tel.: 22 351 7 650  
[poldent@poldent.pl](mailto:poldent@poldent.pl)  
[www.poldent.pl](http://www.poldent.pl)