

Materiały do szycia

Igły i nici chirurgiczne



IGŁY CHIRURGICZNE

Atraumatyczne igły SMI są cienkie, półkoliste, a nić chirurgiczna jest na trwałe zespolona z końcówką igły. Nić powleczone jest silikonem, wygładzającym jej powierzchnię i zwiększającym właściwości atraumatyczne. Igły wykonane są z najwyższej jakości stali, zapewniającej elastyczność i twardość. Występują dwa podstawowe przekroje igieł, stożkowe o przekroju okrągłym (taper point i taper cut point) i o przekroju trójkątnym (reverse cutting i Easy Pass).

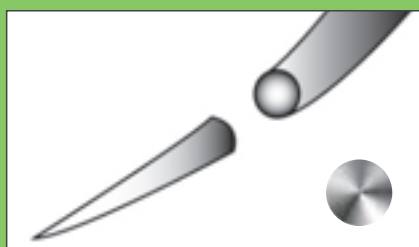
Igły Easy Pass a igły standardowe - penetracja zwiększona o 40 do 50%

3 zaawansowane rozwiązania technologiczne:

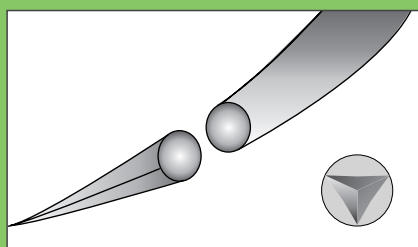
- > Zaawansowana technologia powlekania silikonem.
- > Nowa generacja stali.
- > Zwiększona ostrość igły.

Zalety:

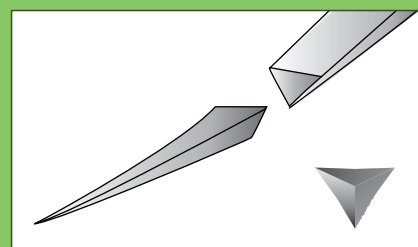
- > Świetna atraumatyczna penetracja.
- > Długotrwała ostrość igły.
- > Optymalna kombinacja twardości i elastyczności.
- > Bardzo gładka powierzchnia.
- > Utrzymująca się ostrość do końca wykonania szwu.



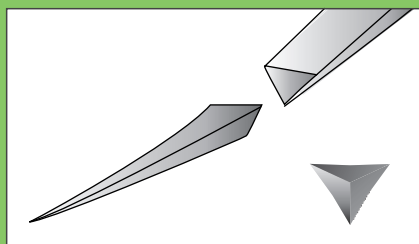
Taper point



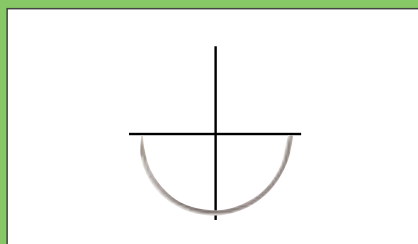
Tapercut point



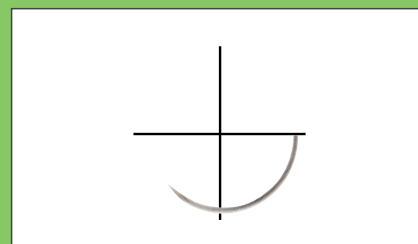
Reverse cutting



Easy Pass needle



1/2 koła



3/8 koła

NICI CHIRURGICZNE

Nici dzielą się na nieresorbowalne, które nie są wchłaniane oraz resorbowalne, podlegające stopniowej resorpcji. Struktura nici może być jednowłóknowa (moniflamenty), o gładkiej jednolitej powierzchni, w na której nie gromadzą się bakterie. Powinny być stosowane tam, gdzie występuje duże ryzyko zakażenia bakteryjnego. Nici wielowłóknowe (multiflamenty) zbudowane są z wielu włókien, plecionych lub skręconych, dodatkowo powlekanych.

Wszystkie nici pakowane są w sterylne blistry, po 12 blistrów w opakowaniu kartonowym.

Nici resorbowalne



SURGICRYL®
910
POLYLACTINE



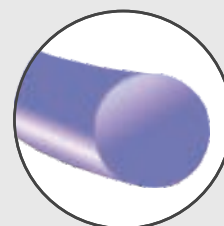
SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID

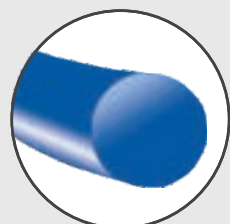


SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLICAPRONE 25



SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE

Nici nieresorbowalne



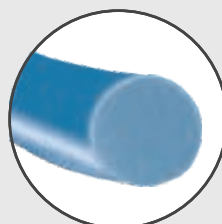
POLYPROPYLENE
BLUE



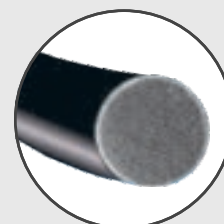
POLYESTER



SILK
BRAIDED
BLACK

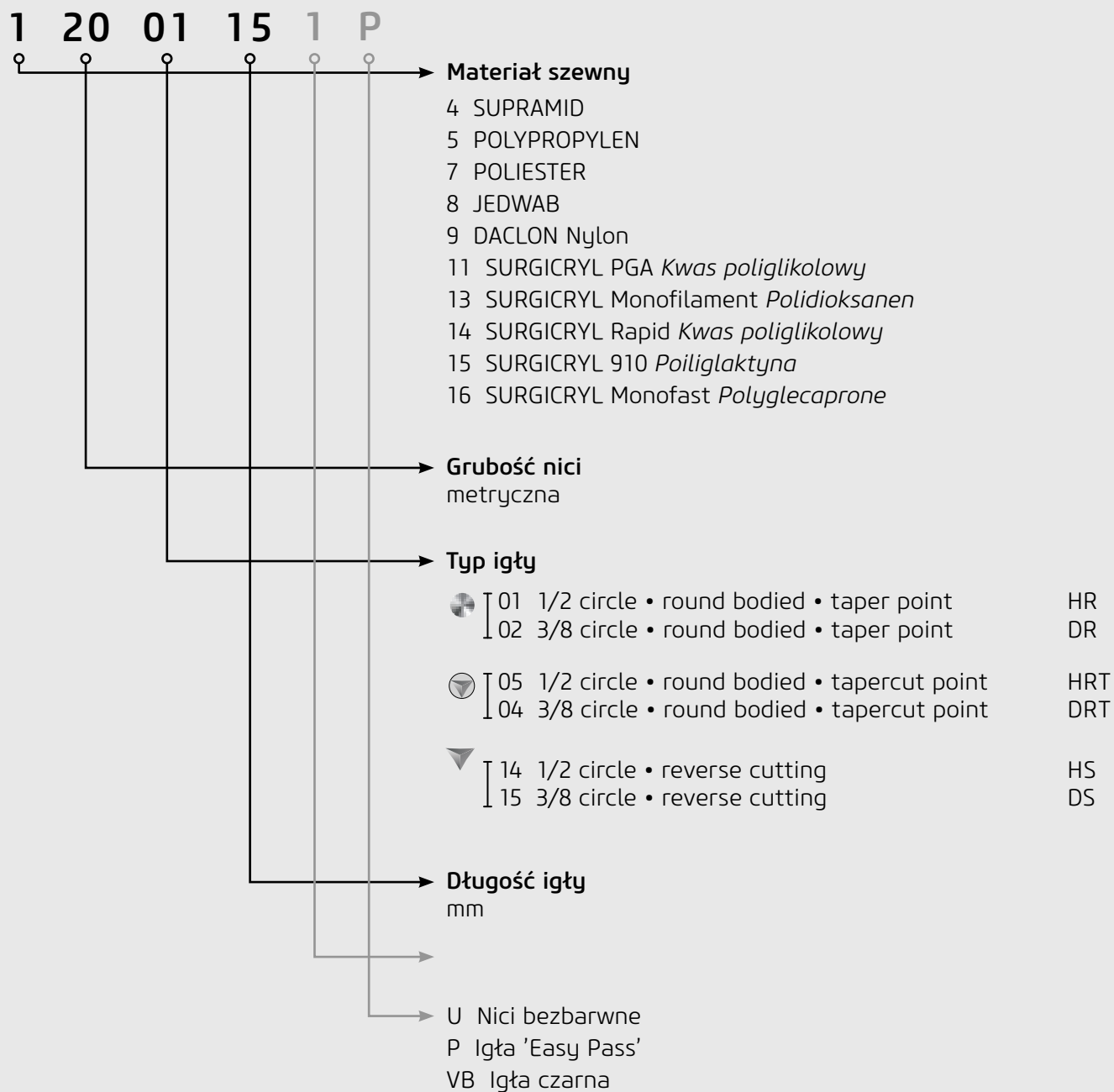


SILK
VIRGIN
BLUE



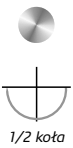
SUPRAMID
BLACK

Oznaczenie symbolu produktu



Nici SURGICRYL 910, poliglaktyna, plecione

Resorbowalne 56 do 70 dni, 40% do 50% wytrzymałości po 21 dniach

Okrągła, 1/2 koła		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 1/2 koła	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	fioletowy	S15070113
		1	5/0	75 cm	fioletowy	S15100113
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S15150113
	HR 17 mm	1	5/0	75 cm	fioletowy	S15100117
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S15150117
		2	3/0	75 cm	fioletowy	S15200117

Stożkowa, odwrotnie tnąca, 1/2 koła		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	HS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	fioletowy	S15071412
	HS 17 mm	1	5/0	75 cm	fioletowy	S15101417
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S15151417

Stożkowa, odwrotnie tnąca, 3/8 koła		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 3/8 koła	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	fioletowy	S15071512
		1	5/0	45 cm	fioletowy	S15101512
		1.5	4/0	45 cm	fioletowy	S15151512
	DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	fioletowy	S15071516
		1	5/0	75 cm	fioletowy	S15101516
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S15151516
		2	3/0	45 cm	fioletowy	S15201516-45
	DS 16 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	nie barwiony	S15201516UP
	DS 16 mm black	0.7	0/6	45 cm	fioletowy	S15071516VB
		1	5/0	75 cm	fioletowy	S15101519
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S15151519
	DS 19 mm	2	3/0	75 cm	fioletowy	S15201519
		1.5	4/0	50 cm	nie barwiony	S15151519UP
		1	5/0	75 cm	fioletowy	S15101519VB
	DS 19 mm black	1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S15151519VB

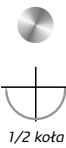
Okrągła, tapercut point, 1/2 koła		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	HRT 13 mm	1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S15150513
	HRT 17 mm	1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S15150517
		2	3/0	75 cm	fioletowy	S15200517

Okrągła, tapercut point, 3/8 koła		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	DRT 13 mm	1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S15150413
	DRT 17 mm	1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S15150417
		2	3/0	75 cm	fioletowy	S15200417

Nici SURGICRYL PGA, kwas poliglikonowy, plecione, powlekane

Resorbowalne 60 do 90 dni, wytrzymałość około 50% po 21 dniach

Okrągła, taper point, 1/2 kąta

		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 1/2 kąta	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	fioletowy	S11070113
		1.0	5/0	75 cm	fioletowy	S11100113
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S11150113
	HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	fioletowy	S11070117
		1.0	5/0	75 cm	fioletowy	S11100117
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S11150117
		2.0	3/0	75 cm	fioletowy	S11200117

Okrągła, taper point, 3/8 kąta

		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	DR 17 mm	1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S11150217
		2.0	3/0	75 cm	fioletowy	S11200217

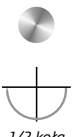
Odwrotnie tnąca, 3/8 kąta

		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 3/8 kąta	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	fioletowy	S11071512
		0.7	6/0	45 cm	nie barwiony	S11071512U
		1.0	5/0	45 cm	fioletowy	S11101512
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S11151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	nie barwiony	S11071512UP
		1.0	5/0	50 cm	nie barwiony	S11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	nie barwiony	S11151512UP
	DS 16 mm	0.7	6/0	75 cm	fioletowy	S11071516
		1.0	5/0	75 cm	fioletowy	S11101516
		1.0	5/0	75 cm	nie barwiony	S11101516U
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S11151516
		1.5	4/0	75 cm	nie barwiony	S11151516U
		2.0	3/0	75 cm	fioletowy	S11201516
	DS 16 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	nie barwiony	S11151516UP
	DS 19 mm	1.0	5/0	75 cm	fioletowy	S11101519
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S11151519
		1.5	4/0	75 cm	nie barwiony	S11151519U
		2.0	3/0	75 cm	fioletowy	S11201519
		2.0	3/0	75 cm	nie barwiony	S11201519U
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	nie barwiony	S11151519UP
		2.0	3/0	50 cm	nie barwiony	S11201519UP

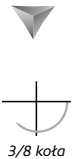
Nici SURGICRYL Rapid, kwas poliglikonowy

Całkowicie resorbowalne po około 42 dniach, wytrzymałość około 50% po 7 dniach

Okrągła, taper point, 1/2 kąta

		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 1/2 kąta	HR 13 mm	1.0	5/0	75 cm	nie barwiony	S14100113
	 HR 17 mm	1	5/0	75 cm	nie barwiony	S14100117
		1.5	4/0	75 cm	nie barwiony	S14150117
		2	3/0	75 cm	nie barwiony	S14200117

Odwrotnie tnąca, 3/8 kąta

		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 3/8 kąta	 DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	nie barwiony	S14071512
		1.0	5/0	75 cm	nie barwiony	S14101512
		1.5	4/0	75 cm	nie barwiony	S14151512
	 DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	nie barwiony	S14071512P
		1.0	5/0	50 cm	nie barwiony	S14101512P
		1.5	4/0	50 cm	nie barwiony	S14151512P
	 DS 16 mm	1.0	5/0	75 cm	nie barwiony	S14101516
		1.5	4/0	75 cm	nie barwiony	S14151516
		2.0	3/0	45 cm	nie barwiony	S14201516
	DS 16 mm black	1.0	5/0	75 cm	nie barwiony	S14101516VB
	 DS 19 mm	1.0	5/0	75 cm	nie barwiony	S14101519
		1.5	4/0	75 cm	nie barwiony	S14151519
		2.0	3/0	75 cm	nie barwiony	S14201519
	 DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	nie barwiony	S14151519P
		2.0	3/0	50 cm	nie barwiony	S14201519P
	 DS 19 mm black	1.5	4/0	75 cm	nie barwiony	S14151519VB
		2.0	3/0	75 cm	nie barwiony	S14201519VB

Odwrotnie tnąca, 1/2 kąta

		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	 HS 17 mm	1.5	4/0	45 cm	nie barwiony	S14151417
		2.0	3/0	45 cm	nie barwiony	S14201417

Okrągła, tapercut point, 1/2 kąta

		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	HRT 17 mm	2.0	3/0	75 cm	nie barwiony	S14200517

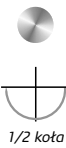
Okrągła, tapercut point, 3/8 kąta

		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	 DRT 16 mm	1.0	5/0	75 cm	nie barwiony	S14100416
		1.5	4/0	75 cm	nie barwiony	S14150416
		2.0	3/0	75 cm	nie barwiony	S14200416

Nici SURGICRYL monofast, polyglekarpron 25

Resorbowalne 90 do 120 dni, wytrzymałość około 60% po 7 dniach

Okrągła, taper point, 1/2 kąta

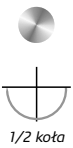
		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 1/2 kąta	HR 13 mm	0.7	6/0	45 cm	fioletowy	S16070113
		1.0	5/0	45 cm	fioletowy	S16100113
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S16150113
	HR 17 mm	1.0	5/0	45 cm	fioletowy	S16100117
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S16150117
		2.0	3/0	75 cm	fioletowy	S16200117

Odwrotnie tnąca, 3/8 kąta

		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 3/8 kąta	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	nie barwiony	S16071512
		0.7	6/0	75 cm	nie barwiony	S16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	fioletowy	S16071512V
		1.0	5/0	45 cm	nie barwiony	S16101512
		1.0	5/0	45 cm	fioletowy	S16101512V
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	nie barwiony	S16071512P
		1.0	5/0	50 cm	nie barwiony	S16101512P
		1.5	4/0	50 cm	nie barwiony	S16151512P
	DS 16 mm	1.0	5/0	75 cm	nie barwiony	S16101516
		1.0	5/0	75 cm	fioletowy	S16101516V
		1.5	4/0	75 cm	nie barwiony	S16151516
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S16151516V
		2.0	3/0	75 cm	nie barwiony	S16201516
	DS 16 mm Easy Pass	1.0	5/0	50 cm	nie barwiony	S16101516P
		1.5	4/0	50 cm	nie barwiony	S16151516P
	DS 16 mm black	1.0	5/0	75 cm	fioletowy	S16101516VB
	DS 19 mm	1.0	5/0	45 cm	nie barwiony	S16101519
		1.5	4/0	75 cm	nie barwiony	S16151519
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S16151519V
		2.0	3/0	75 cm	nie barwiony	S16201519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	nie barwiony	S16151519P
		2.0	3/0	50 cm	nie barwiony	S16201519P
	DS 19 mm black	1.0	5/0	45 cm	fioletowy	S16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	fioletowy	S16151519VB

Nici POLYPROPYLEN blue, jednowłóknowe, nieresorbowalne

Okrągła, taper point, 1/2 kąta

			Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	HR 10 mm		0.5	7/0	45 cm	niebieski	S5050110
			0.7	6/0	75 cm	niebieski	S5070110
	HR 15 mm		0.7	6/0	75 cm	niebieski	S5070115
			1.0	5/0	75 cm	niebieski	S5100115
			1.5	4/0	75 cm	niebieski	S5150115
			2.0	3/0	75 cm	niebieski	S5200117
	HR 17 mm		1.0	5/0	75 cm	niebieski	S5100117
			2.0	3/0	75 cm	niebieski	S5200117
			2.0	3/0	75 cm	niebieski	S5200120
	HR 20 mm		1.0	5/0	75 cm	niebieski	S5100120
			1.5	4/0	75 cm	niebieski	S5150120
			2.0	3/0	75 cm	niebieski	S5200120

Okrągła, taper point, 3/8 kąta

			Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	niebieski	S5150216

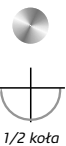
Odwrotnie tnąca, 3/8 kąta

			Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	DS 10 mm		0.7	6/0	45 cm	niebieski	S5071510
			0.5	7/0	45 cm	niebieski	S5051512
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	niebieski	S5071512
			1.0	5/0	45 cm	niebieski	S5101512
			1.5	4/0	75 cm	niebieski	S5151512
			2.0	3/0	75 cm	niebieski	S5201516
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	niebieski	S5071512P
			1.0	5/0	50 cm	niebieski	S5101512P
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	niebieski	S5071516
			1.0	5/0	45 cm	niebieski	S5101516
			1.5	4/0	75 cm	niebieski	S5151516
			2.0	3/0	75 cm	niebieski	S5201516
	DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	niebieski	S5071516P
			1.0	5/0	50 cm	niebieski	S5101516P
			1.5	4/0	50 cm	niebieski	S5151516P
	DS 16 mm black		1.0	5/0	45 cm	niebieski	S5101516VB
	DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	niebieski	S5071519
			1.0	5/0	75 cm	niebieski	S5101519
			1.5	4/0	45 cm	niebieski	S5151519-45
			1.5	4/0	75 cm	niebieski	S5151519
			2.0	3/0	45 cm	niebieski	S5201519-45
			2.0	3/0	75 cm	niebieski	S5201519
	DS 19 mm Easy Pass		1.0	5/0	50 cm	niebieski	S5101519P
			1.5	4/0	50 cm	niebieski	S5151519P
			2.0	3/0	50 cm	niebieski	S5201519P

Nici POLYPROPYLEN blue, jednowłóknowe, nieresorbowalne

Odwrotnie tnąca, 3/8 koła		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	DS 19 mm black	1.0	5/0	75 cm	niebieski	S5101519VB
		1.5	4/0	75 cm	niebieski	S5151519VB
Okrągła, tapercut point, 1/2 koła		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	HRT 10 mm	0.7	6/0	75 cm	niebieski	S5070510

Nici POLYESTER, plecione, nieresorbowalne

Okragła, taper point, 1/2 kąta		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	HR 16 mm	1.0	5/0	75 cm	zielony	S7100116
		1.5	4/0	75 cm	zielony	S7150116
		2.0	3/0	75 cm	zielony	S7200116
	HR 20 mm	1.5	4/0	75 cm	zielony	S7150120
		2.0	3/0	75 cm	zielony	S7200120

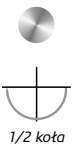
Okragła, tapercut point, 1/2 kąta		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	HRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	zielony	S7150518
		2.0	3/0	75 cm	zielony	S7200518

Odwrotnie tnąca, 3/8 kąta		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	DS 12 mm	1.0	5/0	45 cm	zielony	S7101512
		1.0	5/0	75 cm	zielony	S7101516
	DS 16 mm	1.5	4/0	75 cm	zielony	S7151516
		2.0	3/0	75 cm	zielony	S7201516
	DS 19 mm	1.0	5/0	75 cm	zielony	S7101519
		1.5	4/0	75 cm	zielony	S7151519
		2.0	3/0	75 cm	zielony	S7201519
	DS 19 mm black	1.5	4/0	75 cm	zielony	S7151519VB
		2.0	3/0	75 cm	zielony	S7201519VB

Odwrotnie tnąca, 1/2 kąta		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	zielony	S7151417
		2.0	3/0	75 cm	zielony	S7201417

Nici DACLON, jednowłóknowe, niesorbowlne poliamid 6/6.6

Okrągła, taper point, 1/2 kąta

			Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 1/2 kąta	HR 16 mm		1.0	5/0	75 cm	czarny	S9100116
			1.5	4/0	75 cm	niebieski	S9150116
 1/2 kąta	HR 20 mm		0.7	6/0	75 cm	czarny	S9070120
			1.0	5/0	75 cm	czarny	S9100120
			1.5	4/0	75 cm	niebieski	S9150120
			2.0	3/0	75 cm	niebieski	S9200120

Odwrotnie tnąca, 3/8 kąta

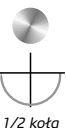
			Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 3/8 kąta	DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	czarny	S9051512
			0.7	6/0	75 cm	czarny	S9071512
			1.0	5/0	75 cm	czarny	S9101512
			1.5	4/0	75 cm	niebieski	S9151512
 3/8 kąta	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	czarny	S9071512P
			1.0	5/0	50 cm	czarny	S9101512P
			1.5	4/0	50 cm	niebieski	S9151512P
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	czarny	S9071516-45
			0.7	6/0	75 cm	czarny	S9071516
			1.0	5/0	75 cm	czarny	S9101516
			1.5	4/0	45 cm	niebieski	S9151516-45
			1.5	4/0	75 cm	niebieski	S9151516
			2.0	3/0	75 cm	niebieski	S9201516
	DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	czarny	S9071516P
			1.0	5/0	50 cm	czarny	S9101516P
			1.5	4/0	50 cm	niebieski	S9151516P
	DS 19 mm		1.0	5/0	45 cm	czarny	S9101519-45
			1.0	5/0	75 cm	czarny	S9101519
			1.5	4/0	45 cm	niebieski	S9151519-45
			1.5	4/0	75 cm	niebieski	S9151519
			2.0	3/0	45 cm	niebieski	S9201519-45
			2.0	3/0	75 cm	niebieski	S9201519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	niebieski	S9151519P
			2.0	3/0	50 cm	niebieski	S9201519P

Odwrotnie tnąca, 1/2 kąta

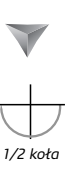
			Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	niebieski	S9151417
			2.0	3/0	75 cm	niebieski	S9201417

Nici SUPRAMID, CZARNY, skręcane, powlekane, nieresorbowalne

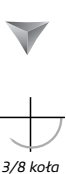
Okrągła, taper point, 1/2 kąta

			Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 1/2 kąta	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	czarny	S4150116
			2.0	3/0	75 cm	czarny	S4200116
	HR 20 mm		2.0	3/0	45 cm	czarny	S4200120

Odwrotnie tnąca, 1/2 kąta

			Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 1/2 kąta	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	czarny	S4151417
			2.0	3/0	75 cm	czarny	S4201417
	HS 20 mm		1.0	5/0	75 cm	czarny	S4101420
			1.5	4/0	75 cm	czarny	S4151420
			2.0	3/0	75 cm	czarny	S4201420

Odwrotnie tnąca, 3/8 kąta

			Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 3/8 kąta	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	czarny	S4071512
			1.0	5/0	75 cm	czarny	S4101512
			1.5	4/0	45 cm	czarny	S4151512
	DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	czarny	S4071516
			1.0	5/0	75 cm	czarny	S4101516
			1.5	4/0	45 cm	czarny	S4151516
			1.5	4/0	75 cm	czarny	S4151516-75
			2.0	3/0	45 cm	czarny	S4201516
			2.0	3/0	75 cm	czarny	S4201516-75
	DS 16 mm black		1.0	5/0	75 cm	czarny	S4101516VB
	DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	czarny	S4071519
			1.0	5/0	75 cm	czarny	S4101519
			1.5	4/0	45 cm	czarny	S4151519
			1.5	4/0	75 cm	czarny	S4151519-75
			2.0	3/0	75 cm	czarny	S4201519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	75 cm	czarny	S4151519P-75
	DS 19 mm black		1.0	5/0	75 cm	czarny	S4101519VB
			1.5	4/0	75 cm	czarny	S4151519VB

Okrągła, tapercut point, 1/2 kąta

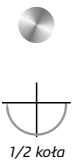
			Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	czarny	S4150518
			2.0	3/0	75 cm	czarny	S4200518

Okrągła, tapercut point, 3/8 kąta

			Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	DRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	czarny	S4150418
			2.0	3/0	75 cm	czarny	S4200418

Nici SILK, jedwabne, plecione lub skręcane, nieresorbowalne

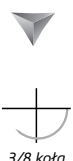
Okrągła, taper point, 1/2 koła

		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 1/2 koła	HR 12 mm	0.7	6/0	45 cm	czarny	S8070112
		1.0	5/0	45 cm	czarny	S8100112
		1.5	4/0	75 cm	czarny	S8150112
	HR 16 mm	0.7	6/0	45 cm	czarny	S8070116
		1.0	5/0	75 cm	czarny	S8100116
		1.5	4/0	75 cm	czarny	S8150116
		2.0	3/0	75 cm	czarny	S8200116
	HR 20 mm	1.0	5/0	75 cm	czarny	S8100120
		1.5	4/0	75 cm	czarny	S8150120
		2.0	3/0	75 cm	czarny	S8200120

Okrągła, taper point, 3/8 koła

		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	DR 12 mm	1.0	5/0	45 cm	czarny	S8100212
	DR 16 mm	1.5	4/0	75 cm	czarny	S8150216
		2.0	3/0	75 cm	czarny	S8200216

Odwrotnie tnąca, 3/8 koła

		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
 3/8 koła	DS 12 mm	0.5	7/0	45 cm	czarny	S8051512
		0.7	6/0	45 cm	czarny	S8071512
		1.0	5/0	45 cm	czarny	S8101512
		1.5	4/0	75 cm	czarny	S8151512
		2.0	3/0	75 cm	czarny	S8201512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	czarny	S8071512P
	DS 14 mm	0.7	6/0	45 cm	czarny	S8071514
	DS 16 mm	0.7	6/0	75 cm	czarny	S8071516
		1.0	5/0	75 cm	czarny	S8101516
		1.5	4/0	75 cm	czarny	S8151516
		2.0	3/0	75 cm	czarny	S8201516
	DS 16 mm Easy Pass	1.0	5/0	50 cm	czarny	S8101516P
		1.5	4/0	50 cm	czarny	S8151516P
	DS 16 mm black	1.0	5/0	75 cm	czarny	S8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	czarny	S8151516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	czarny	S8071519
		1.0	5/0	75 cm	czarny	S8101519
		1.5	4/0	75 cm	czarny	S8151519
		2.0	3/0	75 cm	czarny	S8201519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	czarny	S8151519P
		2.0	3/0	50 cm	czarny	S8201519P

Nici SILK, jedwabne, plecione lub skręcane, nieresorbowalne

Odwrótnie tnąca, 3/8 kąta		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	DS 19 mm black 	1.0	5/0	75 cm	czarny	S8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	czarny	S8151519VB
		2.0	3/0	75 cm	czarny	S8201519VB

Odwrótnie tnąca, 1/2 kąta		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	HS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	czarny	S8071412
		1.0	5/0	75 cm	czarny	S8101417
	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	czarny	S8151417
		2.0	3/0	75 cm	czarny	S8201417
	HS 20 mm 	1.5	4/0	75 cm	czarny	S8151420
		2.0	3/0	75 cm	czarny	S8201420

Okrągła, tapercut point, 1/2 kąta		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	HRT 18 mm 	1.0	5/0	75 cm	czarny	S8100518
		1.5	4/0	75 cm	czarny	S8150518
		2.0	3/0	75 cm	czarny	S8200518

Okrągła, tapercut point, 3/8 kąta		Rozmiar	USP	Długość	Kolor	Numer
	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	czarny	S8150418
		2.0	3/0	75 cm	czarny	S8200418

SMI Spon

Absorbowalne homeostatyczne gąbki żelatynowe

- do tamowania krwawienia



SZHG101010 SMI Spon

Sześćian o wymiarach 10 x 10 x 10 mm

Nazwa, grubość nici (USP)	HR 	HS 	DS 	DR 	HRT (na zamówienie) 	DRT (na zamówienie) 
SURGICRYL 910 <i>Długość igły w mm</i>						
6/0 (na zamówienie)	13	12	12, 16	–	–	–
5/0	13, 17	17	12, 16, 19	–	–	–
4/0	13, 17	17	12, 16, 19	–	13, 17	13, 17
3/0	17	–	16	–	17	17
SURGICRYL PGA <i>Długość igły w mm</i>						
6/0 (na zamówienie)	13, 17	–	12, 16	–	–	–
5/0	13, 17	–	12, 16, 19	–	–	–
4/0	13, 17	–	12, 16, 19	17	–	–
3/0	17	–	16	17	–	–
SURGICRYL RAPID <i>Długość igły w mm</i>						
6/0 (na zamówienie)	–	–	12	–	–	–
5/0	13, 17	–	12, 16, 19	–	–	16
4/0	17, 22	17	12, 16, 19	–	–	16
3/0	17, 22	17	19	–	17	17
SURGICRYL MONOFAST <i>Długość igły w mm</i>						
6/0 (na zamówienie)	13	–	12	–	–	–
5/0	13, 17	–	12, 16, 19	–	–	–
4/0	13, 17	–	12, 16, 19	–	–	–
3/0	17	–	16, 19	–	–	–
POLYPROPYLENE BLUE <i>Długość igły w mm</i>						
7/0 (na zamówienie)	10	–	12	–	–	–
6/0 (na zamówienie)	10, 15	–	10, 12, 16, 19	–	10	–
5/0	15, 17, 20	–	12, 16, 19	–	–	–
4/0	14, 20	–	16, 19	16	–	–
3/0	17, 20	–	19	–	–	–
DACLON <i>Długość igły w mm</i>						
6/0	20	–	12, 16, 19	–	–	–
5/0	16, 20	–	16, 19	–	–	–
4/0	16, 20	17	19	–	–	–
3/0	20	17	19	–	–	–
SUPRAMID BLACK <i>Długość igły w mm</i>						
6/0 (na zamówienie)	–	–	12, 16, 19	–	–	–
5/0	–	–	12, 16, 19	–	–	–
4/0	16, 20	17, 20	16, 19	–	18	18
3/0	16, 20	17, 20	19	–	18	18
SILK <i>Długość igły w mm</i>						
7/0 (na zamówienie)	–	–	12	–	–	–
6/0 (na zamówienie)	12, 16	12	12, 16, 19	–	–	–
5/0	12, 16	17, 22	12, 16, 19	12	18	–
4/0	12, 16	17, 20	12, 16, 19	16	18	18
3/0	16, 20	17, 20	12, 16, 19	16	18	18
POLYESTER <i>Długość igły w mm</i>						
5/0	16	–	12, 16, 19	–	–	–
4/0	16, 20	17	16, 19	–	18	–
3/0	16, 20	17, 22	16, 19	–	18	–

Poldent sp. z o.o.
ul. Dzika 2
00-194 Warszawa
Tel.: 22 351 7 650 - 651
Fax: 22 351 7 679
poldent@poldent.pl
www.poldent.pl

Poldent[®]
CHIRURGIA IMPLANTY